


FAST-LIFT X



FAST-LIFT



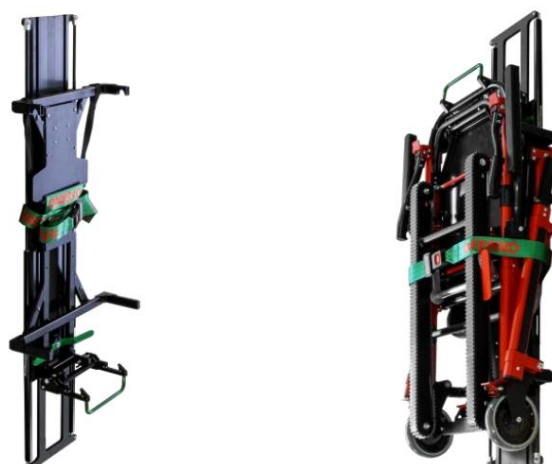

TIP: Regular cleaning helps reduce the risk of transmitting disease and enables the equipment to function at its optimum.

Ansvarsfraskrivelse

Denne manual indeholder generelle instruktioner for brug, betjening og vedligeholdelse af FAST-LIFT, FAST-LIFT X. Sikker og korrekt brug af FAST-LIFT, FAST-LIFT X er brugerens eget ansvar.

Sikkerhedsoplysninger leveres som en service til brugeren. Alle andre sikkerhedsforanstaltninger skal overholde gældende regler. Det anbefales, at brugerne modtager træning i korrekt brug af FAST-LIFT, FAST-LIFT X, før de anvendes i en faktisk situation. Gem denne manual til senere brug, reference.

FAST-LIFT, FAST-LIFT X

Produktspecifikation

Længde:	1296 mm
Bredde:	468 mm
Dybde:	FAST-LIFT X - 283 mm / FAST-LIFT - 212 mm
Vægt:	FAST-LIFT X - 19 kg / FAST-LIFT - 10,5 kg
Belastningsgrænse:	30 kg

Produktnummer	Produkt navn
60-0254-001	FAST-LIFT X
60-0254-002	FAST-LIFT



FAST-LIFT X Funktioner

- Er egnet til FAST PREMIUM, FAST og FST stole
- Giver assisteret hydraulisk løft (f.eks. op på ambulancevæg eller døre, muligvis også i forsænkede opbevaringsrum)
- Med justerbar forlængelse fremad/bagud
- Sikker fastgørelse af stolen

Procedure for fjernelse af stolen fra adapteren



Sørg for, at FAST-LIFT X er i standardpositionen (figur 1).



Løsn fastholdelsesanordningen og træk FAST-LIFT X ud mod dig, mens du låser det grønne håndtag på siden af FAST-LIFT X op (figur 2).



Træk det grønne håndtag mod dig, og Flyt FAST-LIFT X nedad.

Flere låsepositioner er tilgængelige (Figur 3).



Lås stolen op ved hjælp af det grønne håndtag på oversiden af FAST-LIFT X. Træk stolen ud for brug.

Følg trin 4 til 1 i omvendt rækkefølge (figur 4).



Procedure for montering af stolen på FAST-LIFT X



Sørg for, at FAST-LIFT X er i standardposition (figur 1).



Løsn fastholdelsesordeningen og træk FAST-LIFT X ud mod dig, mens du låser det grønne håndtag på siden af FAST-LIFT X op (figur 2).




Træk det grønne håndtag mod dig, og bevæg FAST-LIFT X nedad. Der er flere låsepositioner tilgængelige. (Figur 3).



Træk FAST-LIFT X ned til den ønskede position; om nødvendigt kan du hjælpe ved at placere din fod i stroppen. Før du lægger stolen, skal stroppen sættes tilbage til sin oprindelige position (Figur 4).



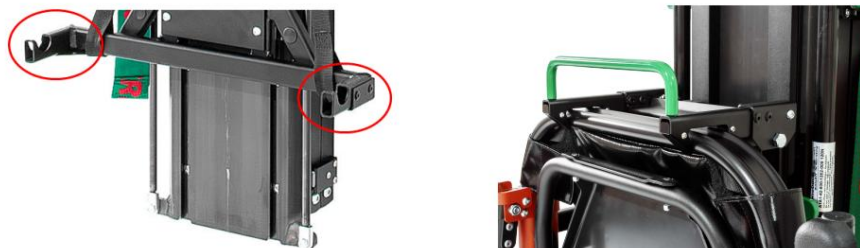

Placer stolen på FAST-LIFT X. Den nederste del af FAST-LIFT X sættes i låsen, og i den øverste position klikker den på plads.

Løft derefter stolen opad ved hjælp af det grønne håndtag på siden af FAST-LIFT X, og tryk stolen med FAST-LIFT X på plads.

(Figur 5).



Fastgør stolen med fastholdelsesordningen (figur 6).

FAST-LIFT-funktioner

- Er egnet til FAST PREMIUM, FAST og FST stole
- Giver assisteret hydraulisk løft (for eksempel op på ambulancevæg eller dør)
- Sikker fastgørelse af stolen

Følg samme procedure for FAST-LIFT i lodret retning, undtagen vandret retning.

[Rengøring og desinfektion]

LAST-LIFT og FAST-LIFT X er nemme at rengøre og desinficere. Tør alle overflader grundigt af med et egnet desinfektionsmiddel. Følg desinfektionsmiddelproducentens anvisninger vedrørende påføringsmetode og kontaktid.

Ferno Slovakiet Kontakt:

Ferno Slovakia sro Bošáca 893 913 07
Slovakiet

Mere information på: www.fernosk.sk

