



FWEWBLS
Ferno Vårdbälte förflyttning



FERNO®



Användarinstruktioner

Dok. ID. 00464-V3 / maj 2023

varning

Denna manual innehåller allmänna instruktioner för användning, drift och skötsel av denna produkt. Instruktionerna är inte heltäckande. Säker och korrekt användning av denna produkt är enbart efter användarens godkännande. Säkerhetsinformation ingår som en tjänst till användaren. Alla andra säkerhetsåtgärder som vidtas av användaren bör vara inom och under beaktande av tillämpliga bestämmelser och lokala protokoll. Utbildning om korrekt användning av denna produkt måste tillhandahållas innan denna produkt används i en verklig situation.

Spara denna handbok för framtida referens. Inkludera den med produkten i händelse av överföring till nya användare. Ytterligare kostnadsfria kopior är tillgängliga på begäran från Customer Relations.

Meddelande om äganderätt

Informationen som avslöjas i denna handbok tillhör Ferno Australia Pty Ltd. Ferno Australia Pty Ltd förbehåller sig alla immateriella rättigheter, äganderätter för design, tillverkningsrättigheter, användningsrättigheter för reproduktion och försäljningsanvändningsrätter till dessa, och till alla artiklar som avslöjas däri förutom till i den mån dessa rättigheter uttryckligen ges till andra eller där det inte är tillämpligt på leverantörens äganderättsdelar.

Begränsad garanti

Produkterna som säljs av Ferno omfattas av en begränsad garanti. De fullständiga villkoren för den begränsade garantin, och begränsningarna av ansvar och friskrivningar, finns också tillgängliga på begäran genom att kontakta Ferno Australia via e-post: info.au@ferno.com.

Meddelande om biverkningar

I händelse av en negativ händelse eller allvarlig incident relaterad till användningen av denna enhet måste slutanvändaren/operatören rapportera incidenten till Ferno Australia, 11 Johnstone Road, Brendale Queensland 4500 Australien, +61 7 3881 4999 eller via e-post till info.au@ferno.com. Om incidenten inträffade inom EU, rapportera den till Fernos auktoriserade EU-representant och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där slutanvändaren är etablerad.



ANVÄNDARMANUALER

För att begära ytterligare kostnadsfria användarmanualer, kontakta Ferno Customer Relations, din Ferno-distributör eller besök www.ferno.com.au.



Ferno Australia Pty Ltd 11
Johnstone Road, Brendale
Queensland 4500, Australien



Ferno Srl
via B. Zallone, n. 26,
40066 Pieve di Cento, Bologna, Italien
+ 35 051 6860028



Ferno (UK) Limited
Stubs Beck Lane, Cleckheaton West
Yorkshire BD19 4T, Storbritannien
+ 44 1274 851999



1 - SÄKERHETSINFORMATION

1.1 Varning

Varningsmeddelanden indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till skada eller dödsfall.

 **VARNING**

Benremmarna är inte utformade eller klassade för att ta patientens hela vikt. Använd inte gångbältet som en lyftsele.

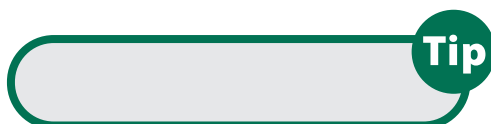
1.2 Meddelande

Meddelanden betonar viktig men inte riskrelaterad information. Underlåtenhet att följa meddelanden kan resultera i produkt- eller egendomsskador.

LÄGGA MÄRKE TILL


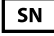







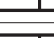
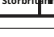
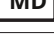
1.3 Tips

Tips ger rekommendationer för enklare användning av produkten.



1.5 Symbolordlista

Symbolerna som definieras nedan används på gångbältet och/eller i denna handbok.

Symbol	Definition
	Produktkod
	Serienummer
	Batchnummer
	Tillverkningsdatum
	Datum för pensionering / utgång
	Tillverkare
	Överensstämmer med Europeiska unionens standarder
	Överensstämmer med Storbritanniens standarder
	Auktoriserad representant Europeiska gemenskapen
	Auktoriserad representant Storbritannien
	Medicinsk utrustning
	Läs och behåll användarinstruktionerna

1.6 Produktidentifieringsetikett

Produktidentifikationsetiketten innehåller viktig information om produkten inklusive serienummer, tillverkningsdatum och pensionering.

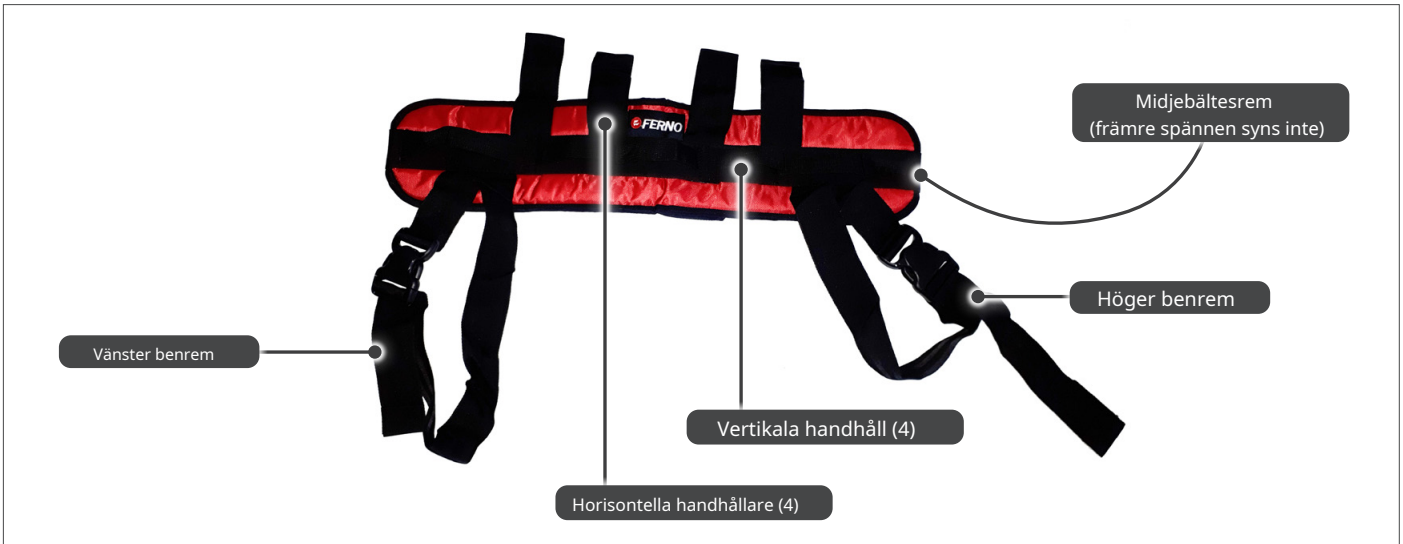


2 - OM GÅNGBÄLTET

Ferno Walk Belt har designats för sjukvårdare och akutsjukvårdare för att hjälpa patienter när de går.

Ferno Walk Belt fäster runt en patients midja och är försedd med åtta handtag – fyra horisontella och fyra vertikala handtag – samt två benremmar som är utformade för att stärka Walk-bältet när det används för att stabilisera ostadiga patienter. Gångbältet minskar avsevärt ansträngningen som krävs av operatören för att hjälpa en patient när han går. Ferno Walk Belt kan tvättas i maskin och återanvändas upprepade gånger.

PRODUKTDESIGNATION:	Stabilitetsstöd. Inte för fallskydd från höjd.
ALLMÄN ANVÄNDNING:	Förbättrar vårdgivarnas förmåga att ge stabilitet till patienter när de går
STORLEK Midjeomkrets:	FWE-WB-LS (Standard)150 cm /FWE-WB-LS L (stor)180cm



3 - MONTERING OCH ANVÄNDNING AV GÅNGBÄLTET

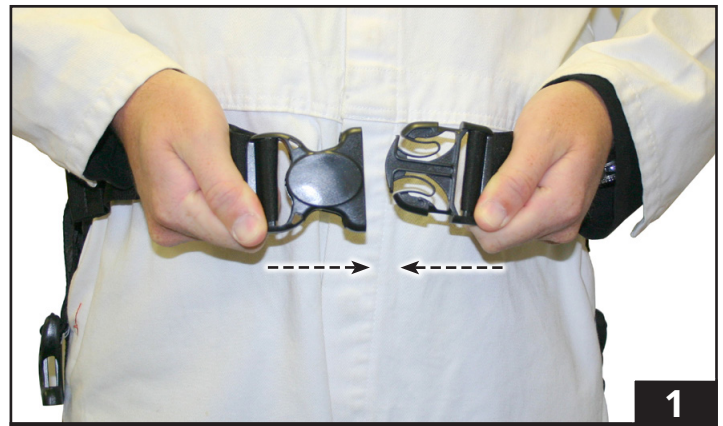
Montering och användning av gångbältet

1. Lossa midjebältesspännet och linda gångbältet runt patientens midja. Kläm ihop spännet och justera bältesremmen ytterligare så att gångbältet ligger tätt mot patientens kropp.

Tip

Förjustera gångbältet

För att spara tid och minska besvären för patienten, uppskatta patientens midjemått och förjustera gångbältet innan du placerar bältet på patienten.



- Släpp det vänstra benremmens spänne. Linda den långa vänstra benremmen runt baksidan av vänster ben till framsidan av benet via ljumskområdet och återanslut spännet (figur 2 och 3). Justera remmarna vid behov, för en åtsittande och bekväm passform.
- Upprepa steg 2 med höger benremmen.
- När gångbältet är ordentligt fastsatt på patienten kan operatören använda vilken som helst av de vertikala eller horisontella handtagen (figur 4 och 5) för att hjälpa patienten när han går.

LÄGGA MÄRKE TILL

Benremmarna måste monteras på patienten om patienten ska flyttas från antingen stående till sittande ställning eller vice versa. Benremmarna är utformade för att stödja patienten under dessa manövrar och håller gångbältet i sitt ursprungliga läge.

! VARNING

Benremmarna är inte utformade eller klassade för att ta patientens hela vikt. Använd inte gångbältet som en lyftsele.

Inspektioner

Inspektera gångbältet för att säkerställa att det är lämpligt för användning innan du förvarar det. En inspektionschecklista tillhandahålls som vägledning. Överlämna alla tecken på försämring till en behörig eller utsedd person för beslut om produktens säkerhet och användbarhet.

CHECKLISTA FÖR INSPEKTION AV GÅRBJÄLT

WEBBNING	Fransar, skärsår eller revor
	Skador på grund av värme, frätande eller lösningsmedel
	Försämring på grund av ruttnande, mögel eller exponering för ultraviolett ljus
SÖMNAD	Trasiga, klippta eller slitna stygn
SPÄNNEN & JUSTERINGAR	Spännena är säkert sydda till Walk Belt-bandet
	Snabbkopplingsspännena kopplas in positivt när de ansluts
	Quick Connect Buckle-utlösningssystemet fungerar smidigt när den är aktiverad

Rengöring

Denna produkt bör rengöras regelbundet för att bibehålla dess säkerhet och användbarhet.

- Borsta bort lös smuts.
- Spraya på en rengöringslösning. Använd inte lösningar som innehåller blekmedel, fenoler, jodider eller petroleum.
- Använd en mjuk borste för att rengöra.
- Låt rengöringslösningen tränga in i bandet.
- Handtvätt eller maskintvätt upp till 40° Celsius.
- Lufttorka i ett väl ventilerat utrymme, borta från direkt solljus.

Lagring

Förvara produkten borta från direkt solljus, mycket damm och fukt och frätande atmosfärer.

