

Modell 11-2220	Mule II Rescue LitterWheel with Handles
Model 11-2210	Mule II Rescue LitterWheel
Model11-2220-G	Mule II LitterWheel with Handles, Large S
Model 11-2210-G	Mule II LitterWheel, Large S

Ansvarsfraskrivelse

Denne håndboken inneholder generelle instruksjoner for bruk, bruk og vedlikehold av dette produktet. Instruksjonene er ikke altomfattende. Sikker og riktig bruk av dette produktet er bare etter brukerens skjønn. Sikkerhetsinformasjon er inkludert som en tjeneste for brukeren. Alle andre tiltak som er tatt av brukeren, bør være innenfor og under hensyn til gjeldende regelverk. Det anbefales at det gis opplæring i riktig bruk av dette produktet før du bruker dette produktet i en faktisk situasjon.

Oppbevar denne håndboken for fremtidig referanse. Inkluder det med produktet i tilfelle overføring til nye brukere. Ytterligere gratis eksemplarer er tilgjengelig på forespørsel fra kundeservice.

Merknad om eiendom

Informasjonen som er beskrevet i denne håndboken er eiendommen til TraverseRescue, LLC., Mississauga, ON Canada. Traverse Rescue, LLC. forbeholder seg alle patentrettigheter, proprietære designrettigheter, produksjonsrettigheter, reproduksjonsbrukerrettigheter og salgsbruksrettigheter dertil, og til enhver artikkel som er beskrevet der, bortsett fra i den grad disse rettighetene uttrykkelig er gitt til andre eller gjelder ikke for leverandørens egne deler.

© Copyright Traverse Rescue, LLC. Alle rettigheter forbeholdt

Traverse Rescue, LLC.
2460 Tedlo Street
Mississauga, Ontario
Canada L5A3V3

Telefon: 905 279 7866

Avgiftsfri (Canada og USA): 1 866 998 7866

Faks: 905 615 1199

www.traverserescue.com



Ferno srl
Via B.Zallone, 26
40066 Pieve di Cento, Italia
+ 39 0516860028



Ferno (UK) Limited
Stubs Beck Lane, Cleakheaton
West Yorkshire BD19 4TZ, Storbritannia
44 (0) 1274 851999



Traverse Rescue, LLC produserer produktene våre under et strengt kvalitetsstyringssystem. Traverse Rescue LLC er et ISO 9001: 2015-sertifisert selskap.

CE- og UKCA-symbolene på Traverse Rescue, LLC-produkter betyr at dette produktet er sertifisert i samsvar med EU-rådets direktiv 93/42 / EØF. Traverse Rescue, LLC erklærer at dette produktet er et medisinsk utstyr og oppfyller EF-forordning (EU) 2017/745.

Mule II Rescue Litter Wheels produsert av Traverse Rescue, LLC er fastslått å være klasse 1-enheter.

1. Sikkerhetsinformasjon

1.1 Advarsler

Følgende er advarsler i denne håndboken:

!!! ADVARSEL !!!

Utrente operatører kan forårsake personskade eller bli skadet. Tillat bare opplært personell å bruke Mule II.

*

Feil bruk av Mule II kan forårsake personskade. Bruk Mule II bare til det formålet som er beskrevet i denne håndboken

*

En uhemmet eller utilbørlig pasient kan lide skader. Fest alltid pasienten i Mule II med et fastholdelsesanlegg som passer til situasjonen

*

Feil bruk kan forårsake personskade. Bruk kun Mule II som beskrevet i denne håndboken

*

En ubesøkt pasient kan bli skadet. Hold deg til pasienten til enhver tid

*

Hjelpere kan forårsake skade eller bli skadet. Oppretthold kontrollen over Mule

II og rett alle hjelpere

*

Feil vedlikehold kan forårsake personskade og skade. Vedlikehold bare Mule II som beskrevet i denne håndboken

*

Feil deler og service kan forårsake personskade. Bruk bare Traverse-godkjente deler og service på Mule II

*

Endring av Mule II kan forårsake personskade og skade. Bruk kun Mule II som selges av Traverse.

*

Feste uriktig eller upassende gjenstander til Mule II kan forårsake personskade. Bruk bare gjenstander som er godkjent av Traverse på Mule II. *

1.2 Viktig

Ruter som den nedenfor understreker viktig informasjon.

VIKTIG

Redningsprosedyrer ved bruk av tau, seler, hodelag og annet personlig verneutstyr krever spesielle ferdigheter og er potensielt farlige aktiviteter. Redningspersonell bør ikke prøve slike redningsprosedyrer før de har mottatt profesjonell instruksjon og opplæring.

1.3 Merknad om blodbåren sykdom

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) krever at arbeidsgivere beskytter arbeidstakere mot eksponering på arbeidsplassen for blodbårne sykdommer som HIV-1 og hepatitt. For å redusere risikoen for eksponering når du bruker Mule II, følg instruksjonene for desinfisering og rengjøring i denne håndboken.

1.4 Sikkerhetsmerker

Etiketter plasserer viktig informasjon fra brukerhåndboken på mulen II.

Les og følg instruksjonene på etiketten. Bytt ut slitte eller skader etiketter umiddelbart. Nye etiketter er tilgjengelige fra Traverse.

Load-Limit-etiketten som vises er festet til redningskullet.



2. Operatørferdigheter og opplæring

2.1 Ferdigheter

Operatører som bruker Mule II trenger:

Arbeidskunnskap om akutte pasienthåndteringsprosedyrer. Evnen til å hjelpe pasienten.

En fullstendig forståelse av prosedyrene beskrevet i dette Håndbok.

2.2 Opplæring

Trainees trenger:

Følg et treningsprogram designet eller godkjent av treneren offiser

Les denne håndboken. For ytterligere gratis brukerhåndbøker, kontakt Traverse

Kundeservice.

Øv med Mule II før du bruker den i vanlig service

Bli testet på deres forståelse av Mule II

Registrer treningsinformasjonen. Et eksempel på en treningsplan og

Vedlikeholdsark er levert (**Side 9**)

3. Om theMule II

3.1 Mule II Beskrivelse

Mule II er designet for å transportere de fleste stiler av redningskull eller rygg Brett over ulendt terreng under nødredningsaksjoner.

Mule II er til bruk av opplært redningspersonell. Det er behov for minst to personer for å betjene Mule II når du transporterer en pasient, men ytterligere hjelp kan være nødvendig i visse situasjoner og forhold. Mule II-funksjonene inkluderer:

- Design har plass til alle Traverse Rescue Kull og de fleste stiler av andre redningskull
- Hjulet kan fjernes raskt for lagring eller transport inne i hjulet ramme
- Store ATV-hjul sporer godt over all slags terreng og absorberer støt for pasientkomfort
- Et par festestropper bruker skralle spenner for raskt og tett hold, og vinylbelagte kroker
- Valgfrie håndtak gir forbedret kontroll

3.2 Generelle spesifikasjoner

Mule II (distribuert)		
Lengde	33 tommer	84 cm
Bredde	26 tommer	66 cm
Dybde	29 tommer	74 cm
Dybde (lagret)	19 tommer	48 cm
Vekt	36 kg	16 kg
Nominell belastningsgrense	500 kg	227 kg

Mule II med håndtak (utplassert)		
Lengde	96 tommer	244 cm
Lengde (lagret)	33 tommer	66 cm
Bredde	27,5 tommer	70 cm
Bredde (lagret)	32 tommer	81 cm
Dybde	29 tommer	74 cm
Dybde (lagret)	19 tommer	48 cm
Vekt	46 kg	21 kg
Nominell belastningsgrense	500 kg	227 kg

Konstruksjon

Ramme

Aluminiumaksel 3/4-in. Dekk i

rustfritt stål AT

22x11-8 Bruk maks. 10 psi


Spesifikasjonene er avrundet til nærmeste hele tall. Metriske konverteringer beregnes før avrundning av keiserlige målinger. Traverse forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.

!!! ADVARSEL !!!


Utrente operatører kan forårsake personskade eller bli skadet. Tillat bare opplært personell å bruke Mule II.

3.3 Komponenter

Mule II

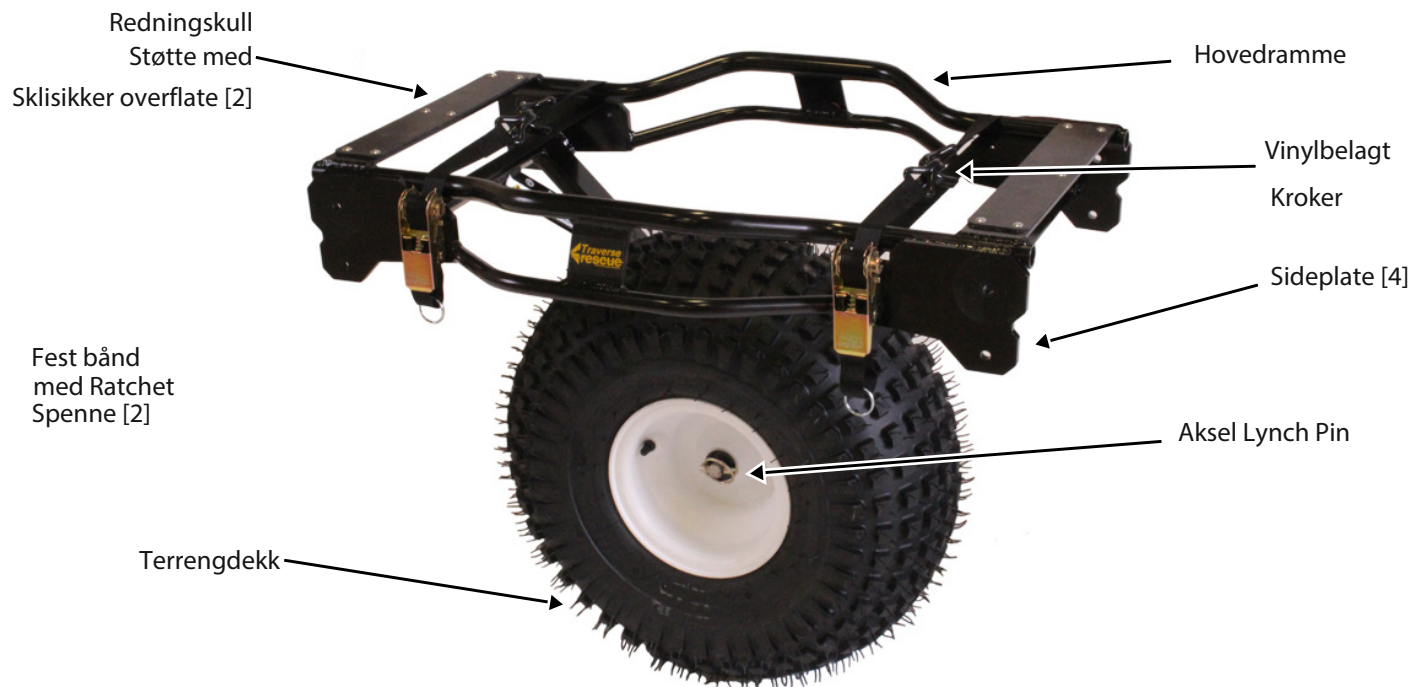

Mule II (motsatt side)

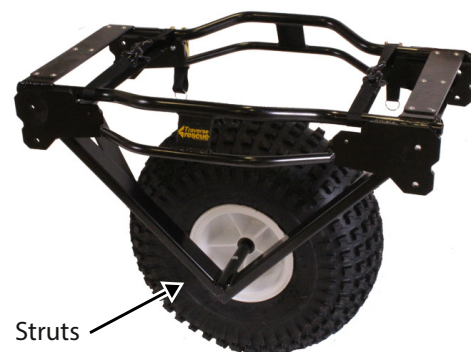


Mule II med håndtak



4. Betjening av festene

4.1 Ratchet Buckles

Mule II er utstyrt med to festestropper utstyrt med sperrer (Fig. 1) for å sikre redningskullet til Mule II.

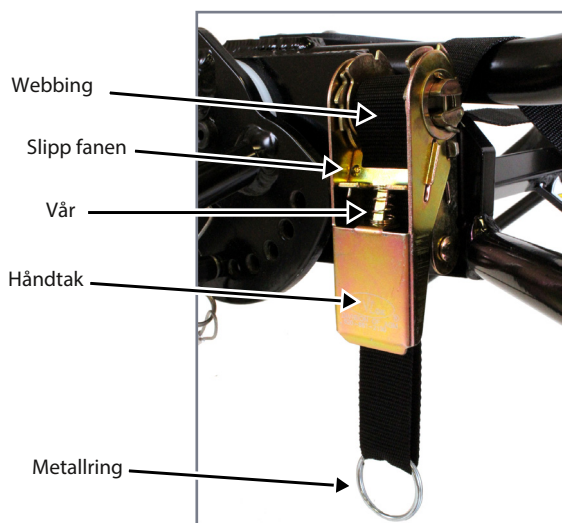

Figur 1. Komponenter for skralle spenne

4.2 Løsne spenningen på stroppen

1. Trykk på og hold utløsertappen og åpne håndtaket helt til det klikker på plass. Dette overstyres skrallefunksjonen (fig. 2).




Figur 2. Helt åpent håndtak

2. Trekk stroppen gjennom rullen for å ta slakk, trykk deretter ned og hold utløsertappen og lukk håndtaket for å løsne fra sperren.

4.3 Spenning av stroppen

Arbeid håndtaket opp og ned til stroppen er riktig spent for å sikre lasten, og lukk deretter håndtaket helt for å låse og holde stroppen (fig. 3).

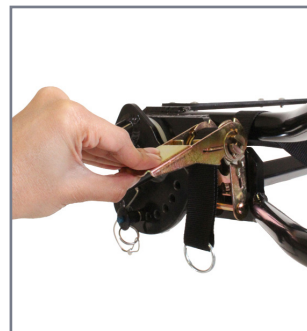


Figur 3. Arbeidshåndtak opp og ned til spenning

4.4 Lynch Pin for Wheel

Hjulet er festet på akselen med en låsestift. Tappens selvlåsende ring klikker på plass for å holde enheten forsiktig og tillater også rask fjerning. Bruk lynchestiften som vist nedenfor.

1. Skyv lynchestiften inn i akselen (fig. 4).
2. Drei ringen mot tappen for å låse

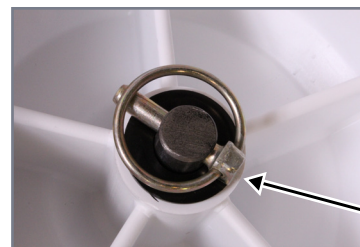


Figur 4. Lynch Pin i Axle

4.5 Hurtigpinne for justering av håndtak

Håndtakene (valgfri funksjon) justeres til åtte posisjoner. Hurtigtutløserpinnen fester håndtaket i valgt posisjon (Fig 5 og 6).



Figur 5

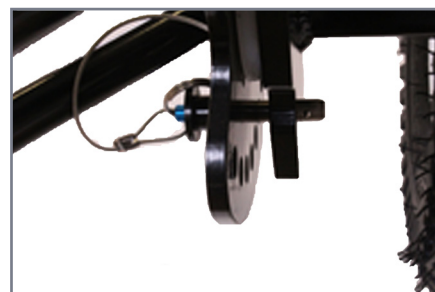

Figur 6

5. Distribusjon og sammenbrudd


5.1 Implementering uten håndtak

1. Begynn med Mule II i oppbevaringsposisjon og fjern lynchestiften fra akselen (Fig 7).




Figur 7

2. Løft hjulet ut av holderen og skyv på akselen med luftventilen vendt bort fra hoveddrammestagene (fig. 8).

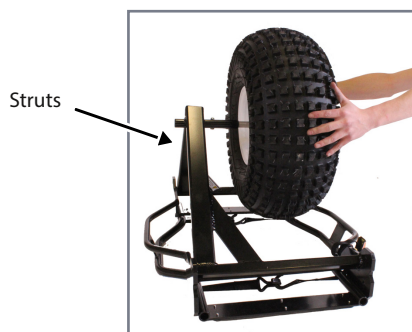

Figur 8. Plasser hjulet på akselen

3. Fest hjulet på akselen med lynchestift (Fig 9).

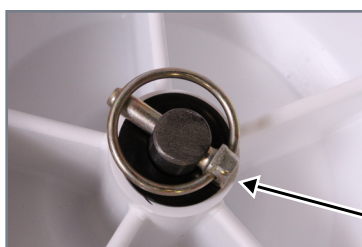

Figur 9. Lynpinne i aksel

4. Snu Mule II loddrett på hjulet (Fig 10).



Figur 10

5.2 Implementering med håndtak

1. Begynn med Mule II i oppbevaringsposisjon og fjern lynchestiften fra akselen (Fig 11).



Figur 11

2. Brett ut topphåndtaket og lås på plass med hurtigutløsertapper (fig 12).




Figur 12

3. Løft hjulet ut av holderen og skyv på akselen med luftventilen vendt bort fra hoveddrammestagene (Fig 13).



Figur 13

4. Fest hjulet på akselen med lynchestift (Fig 14).

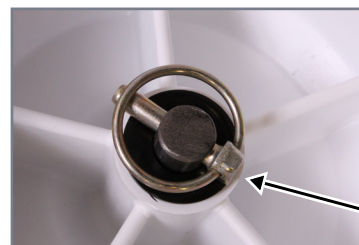

Figur 14. Lynch Pin in Axle

5. Drei Mule II loddrett på hjulet (Fig 15).



Figur 15

6. Brett ut det andre håndtaket og lås det på plass med hurtigutløsertappene (Fig 16).



Figur 16

5.3 Bryt sammen uten håndtak

1. Sett sammen stroppekrokene på toppen av Mule II og strammestroppene stramt mot rammen (Fig 17).



Figur 17

2. Snu Mule II opp ned (Fig 18).



Figur 18

3. Fjern ringstiften og skyv hjulet av akselen (Fig 19).



Figur 19

4. Nest hjul i rammeholder og skyv lynchestiften på akselen og lås (Fig 20).



Figur 20

5.4 Bryt ned med håndtak

1. Sett sammen stroppekrokene på toppen av Mule II og strammestroppene stramt mot rammen (Fig 21).



Figur 21

2. Fjern hurtigutløserpinnene fra håndtaket og brett håndtaket over toppen av Mule II (Fig 22).



Figur 22

3. Snu Mule II på hodet, fjern deretter lynchestiften og skyv hjulet av akselen (Fig 23).



Figur 23

4. Nest hjulet i rammeholderen og skyv lynchestiften tilbake i akselen og lås (Fig 24).



Figur 24

5. Fjern hurtigutløsertappene fra det andre håndtaket og brett håndtaket over Mule II-akselen (Fig 25).



Figur 25

6.0 Fest redningskull til Mule II

De fleste stiler av redningskull, ski-patrolje-akebrett og bakplater kan festes til Mule II. Fest stroppekrokene til riktig skinne, håndtak eller annet element i redningskullet.

Om nødvendig kan stroppene brukes i full lengde og vikles under og over (helt rundt) redningsenheten. Kroker settes deretter sammen og stroppene strammes for å holde enheten tett mot redningskullstøttene.

1. Løsne spenningen på stroppene og separate kroker.
2. Plasser redningskull på Mule II og sentrer det over rattet.
3. Fest alle de 4 krokene på den øverste skinnen av redningskullet.
4. Spenn begge stroppene til redningskullet er tett mot redningskullstøttene.
5. Kontroller at håndtakene på skralle er lukket.

7. Reparasjon, deler og service

Hvis Mule II viser overdreven slitasje eller sprekker (enten i materialet eller ved sveisene), er det på tide å trekke den fra bruk. Ikke prøv å reparere eller bytte ut metallkomponenter eller sveiser.

Hvis hjulet, stroppene, etikettene eller håndtakene er skadet eller mangler, kan du ringe din forhandler eller Traverse Rescue kundeservice for å få reservedeler.

Følg alltid instruksjonene som følger med tilbehør. Hold instruksjonene i denne håndboken. Vær oppmerksom på eventuelle spesielle hensyn

(lastehøyder, dørhøyder osv.)

Delenummer	Beskrivelse
11-1114	Erstatningshjul
06-0174	Lynch Pin
11-0224	Utskiftningshåndtak (hver)
04-0127P	Fest stropper med kroker (par) Fest
04-0129P	stropper med kroker, med S (par)

8. Begrenset garanti

Traverse Rescue, LLC (Traverse) Limited Garanti oppgir at alle Traverse-produkter er garantert i en periode på ett år etter fakturadato, til den opprinnelige kjøperen. Denne garantien gis mot materialfeil eller mangler. I tilfelle en slik feil eller mangel i løpet av denne garantiperioden, vennligst kontakt Traverse Rescue umiddelbart. Traverse Rescue, LLC godtar å reparere eller erstatte (etter vårt valg) det defekte produktet. Vår begrensede garanti dekker ikke skader på grunn av misbruk, misbruk, mangel på pleie, feil bruk eller ulykker. Det dekker heller ikke skader på grunn av forsøk på reparasjon fra kjøperen som ikke var autorisert av Traverse Rescue, LLC. Ingen andre garantier eksisterer eller er underforstått av Traverse Rescue, LLC. Denne begrensede garantien ekskluderer, og Traverse skal ikke holdes ansvarlig for noe straffende, tilfeldig, spesielle eller eksemplariske skader som oppstår som følge av brudd på garantien ved salg av Traverse eller på annen måte, eller gjennom ytelse eller manglende ytelse av noen tredjepartsdel, produkt, tjeneste eller system. Denne begrensede garantien begrenser ikke på noen måte eller endrer på noen måte andre produsenters garantier på produkter som selges av Traverse Rescue, LLC.

9. Travers Customer Care

Kundeservice og produktsupport er viktige aspekter ved hvert Traverse-produkt.

For hjelp med dette eller annet Traverse-produkt, vennligst kontakt Traverse kundeservice.

Ha serienummeret til ditt Traverse redningskull tilgjengelig når du ringer til Traverse Customer Care, og inkluder dette nummeret med eventuell skriftlig kommunikasjon.

Traverse Rescue, LLC.
2460 Tedlo Street
Mississauga, Ontario
Canada L5A 3V3

Telefon 905 279 7866
Avgiftsfri (Canada og USA) 1 866 998 7866
Faks 905 615 1199
E-post info@traverserescue.com
Nettsted www.traverserescue.com



