



LIGGANDE TRANSPORTER



Patienthantering är kärnan i Ferno Nordens verksamhet. I över 60 år har vi globalt utvecklat och producerat utrustning i nära samarbete med våra användare.

Ambulansbårar

En ambulansbår är central inom all liggande transport. Ett verktyg som ska underlätta vardagen för personalen. Säkerhet, ergonomi, hygien och flexibilitet är viktigt. I den här katalogen har vi lyft fram de bårar som passar för liggande transporter. Enkelhet och ergonomi i fokus. Vi har även sett en ökad efterfrågan på elektriska bårar som helt tar bort lyft momentet vid i och urlastning. Vilken bårmodell passar er verksamhet?

Bärstolar / Trappstolar

Numera har praktiskt taget alla verksamheter en bärstol/trappstol i sina specialfordon. Utvecklingen sker ständigt och kapaciteten ökar. Hopfällbara, utdragbara handtag, sidoarmstöd, larvfötter, elektriska larvfötter, avtagbara larvfötter, förvaring, vikt – ja, det finns många frågor och alternativ. Vi har flera modeller att välja mellan, vilken modell passar er?

Akutmadrasser

En akutmadrass (transportmadrass) är inte bara en vanlig madrass utan en egen enhet definierad enligt EN-1865 för ambulanssjukvård. Hygienisk och slitstark med flera handtag för lyft, den ska klara minst 150 kilo, ha komfort på patientsidan samt en styv baksida för förflyttning. Den ska tåla temperaturer från -30°C till +70°C och vara röntgengenomsläpplig. Våra akutmadrasser har även minnesskum för högsta komfort och används dagligen tillsammans med vårt tillbehör Step by Step.

Ergonomiska tillbehör

Patienthantering kan verka enkelt, men det är en daglig arbetsuppgift som måste lösas så ergonomiskt, hygieniskt och flexibelt som möjligt. Arbetet kring en ambulansbår blir aldrig bättre än de hjälpmedel som används, och idag tar vi oftare patienten till båren i stället för båren till patienten. Vilka tillbehör passar er?

Första hjälpen & Hjärtstartare

Att ha ett bra och genomtänkt koncept för en första insats om olyckan är framme underlättar. Vi har en lång erfarenhet av att packa färdiga sjukvårdsväskor till alla typer av verksamheter.

Våra hjärtstartare är noga utvalda för sin enkelhet och pålitlighet. Vi har valt 2 modeller där eftermarknad och support har en bra tillgänglighet på den svenska marknaden.

Belysning

Vi har ett brett sortiment av lampor för att kunna lysa upp utanför fordonet så i och urlastning kan ske tryggt och säkert. Våra innerbelysningar är också populära med möjligheter att kunna växla mellan vitt och rött ljus. Att ha en bra ficklampa tillgänglig eller en pannlampa så man får fria händer när man arbetar underlättar under dygnets mörkare timmar.

Allfa Legend 20G komplett


ALLFA LEGEND är en ambulansbår som möter de krav en modern ambulanssjukvård ställs inför.

Uppdrag som kan skifta från fjällmiljö, trånga hissar/trappor i gamla byggnader, öar ute på kusten, helikoptersjukvård, sjuktransporter och vanliga ambulansuppdrag.

Allt från nyfödda till överviktiga vuxna skall kunna transporteras säkert och bekvämt. Liggande, sittande eller i olika medicinska positioner. ALLFA LEGEND är en bår för alla patienter i alla miljöer.

Allfa Legend är en svensktillverkad bår som är mycket populär för liggande transporter, enkel att hantera, enkel att serva samt att den levereras komplett med terränghjul, bårsele, kudde, madrass och bälten.

Art.Nr	ALE112001
Lastkapacitet	300 kg
Vikt	29,2 kg (36 kg)
Höjd	1290/200 mm
Längd	1900/1250 mm
Bredd	550 mm
Certifieringar	EN 1865, EN 1789 & TSFS (10g+20g)

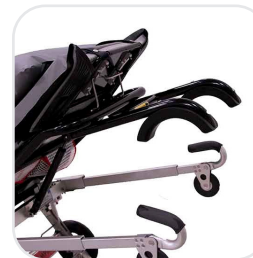

Ambulansbår Viper Power + VLS

Ferno VLS (Viper Loading System) är ett ergonomisk i- och urlastningssystem och bårlös för Ferno VIPER ambulansbår. Ferno VLS är ett lätthanterat och flexibelt system som tillåter dig att lasta in båren från varierande vinkel och höjd på under 20 sekunder.

VLS kommer automatiskt centrera båren inför inlastningen. VLS är en marknadens lättaste system vilket ger en lägre totalvikt i ambulansen. VLS är stabil och ergonomisk, mekanisk konstruktion med en inbyggd smart laddning för VIPER båren.

Ferno VIPER är framtidens bårlosning inom liggande transporter. Levereras komplett med lås, bälten och madrass. Ferno VIPER är en elektrisk bår som tar bort alla lyft vid i-och urlastning i fordonet.

Art.Nr	F1000
Lastkapacitet	320 kg Viper / 400 kg VLS
Vikt	VIPER 82 KG / VLS 69 KG = 151 KG
Höjd	133 cm (38 cm) Viper
Längd	200 cm (160 cm) Viper / 200 cm VLS
Bredd	60 cm Viper / 57 cm VLS
IP-klass	IP66
Certifieringar	EN 1865 och EN 1789 (10g)



Ferno F3 Lift-Off H69

Ferno F3 Lift-Off ambulansbår är en robust och praktisk bår som är designad för ett enkelt handhavande. Tydliga funktioner med enkla handgrepp gör att man snabbt lär sig hantera båren. Ferno F3 kan justeras i sju olika höjder för enkel av och pålastning. De stora 200mm hjulen tar dig fram även på ojämt underlag, alla 4 hjulen kan frikopplas för att enklare kunna svänga båren 360 grader i trånga utrymmen. Två av hjulen går att riktningslåsa så båren kan rullas kontrollerat av en person. Ferno F3 klarar av 250 kg belastning.

Ferno F3 Lift-Off är ett 2-delat system med en avtagbar bår som underlättar om man skulle behöva bära en liggande patient.

Levereras komplett med bälten och madrass.

Art.Nr	F600330004SN
Certifieringar	EN 1865, EN 1789 & TSFS (10g+20g)
Vikt	40,3 kg (18,3+32)
Höjd	31,5-85 cm
Längd	194,5-235 cm
Bredd	56,8 cm

Ferno F3 Monobloc H69

Ferno F3 Monobloc ambulansbår är en robust och praktisk bår som är designad för ett enkelt handhavande. Tydliga funktioner med enkla handgrepp gör att man snabbt lär sig hantera båren. Ferno F3 kan justeras i sju olika höjder för enkel av och pålastning. De stora 200mm hjulen tar dig fram även på ojämt underlag, alla 4 hjulen kan frikopplas för att enklare kunna svänga båren 360 grader i trånga utrymmen. Två av hjulen går att riktningslåsa så båren kan rullas kontrollerat av en person. Ferno F3 klarar av 250 kg belastning.

Chockläge, knäläge samt ett steglöst ryggstöd gör båren anpassningsbar utifrån behov. Rejåla Sidoarmstöd som enkelt fälls upp eller ned och dropphållare är funktioner som ingår.

Levereras komplett med bälten och madrass.

Art.Nr	F600330004SN
Certifieringar	EN 1865, EN 1789 & TSFS (10g+20g)
Vikt	45 kg
Höjd	31,5-85 cm
Längd	194,5-235 cm
Bredd	56,8 cm



Ferno F3 Bårlås 20G

Bårlås för Ferno F3 ambulansbår testat enligt EN-1789 (10g) samt TSFS (20g). Enkelt och säkert låssystem som enkelt monteras mot en bårlåda eller direkt på golvet.

Art.Nr F003011002



Bredd 51,3 cm

Vikt 11 kg

Höjd 7,6 cm

Längd 178,1 cm

Certifieringar EN 1865, EN 1789 & TSFS (10g+20g)

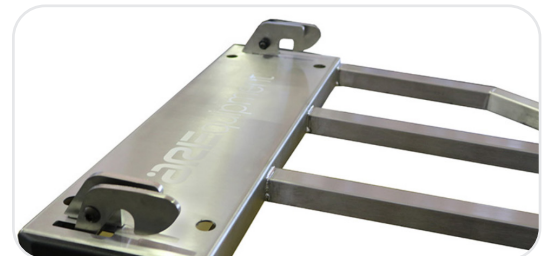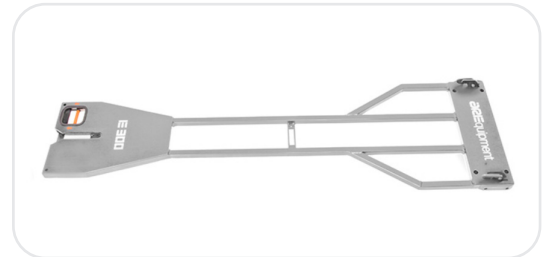

Bårskena komplett Alfa 20g

Klassisk bårskena för Alfa ambulansbårar.



Art.Nr AL151520

Certifieringar EN 1865, EN 1789 & TSFS (10g+20g)

Höjd 8,3 cm

Längd 178,7 cm

Bredd 57,5 cm

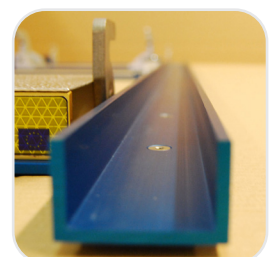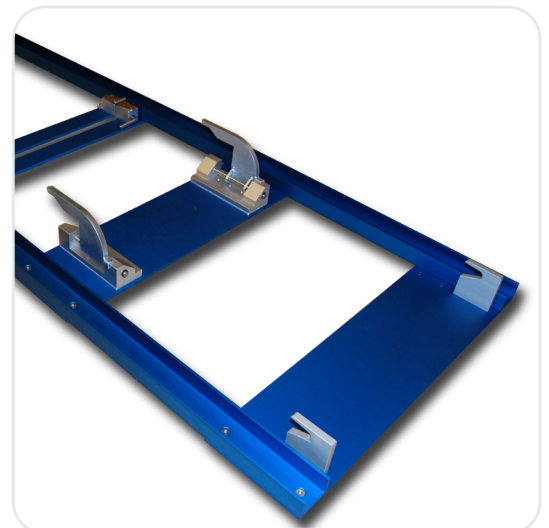

Bärstol Trappstol Transcend™ PowerTraxx® 250kg

Transcend™ PowerTraxx® trappstolen erbjuder operatörer och patienter maximal säkerhet och kraft vid transport upp och ner för trappor. Den elektroniskt styrda motorn med direktdrivöverföring driver banden och hanterar patientbelastningar på upp till 250 kg med lätthet. Batteriet har en imponerande kapacitet som kan hantera ett 24-timmars skift utan problem (i genomsnitt 40 trappor upp och ner). Släta och stora 12x3 cm svängbara framhjul och extra stora 20x4 cm bakhjul med integrerade stötdämpande däck säkerställer enkel navigering i svår terräng. Hjulens design förhindrar ansamling av smuts och är lätta att rengöra.

Transcend™ PowerTraxx® tar lite plats när den är hopfälld (Mått hopfälld: 912 x 507 x 200 mm). Inga delar sticker ut, vilket förhindrar klämskador vid in- och utlastning. Stolen är låst i hopfällt läge för enkel hantering.

Art.Nr	F0731403
Lastkapacitet	250 kg
Vikt	23,3 kg
Höjd	151,8 / 90,8 cm
Djup	76 / 135 cm
Bredd	50,5 cm

Bärstol trappstol Ferno Fast Chair avtagbar power

FAST är den mest flexibla serien av trappstolar för en enkel och ergonomisk patienthantering. FAST systemet är en ny och flexibel stolslösning, bärstol och powerstol med motor i ett.

Med motoriserade larvfötter (PowerTraxx), kan man utan enkelt transportera patienter upp och ner i trappor.

Om man hamnar i situationer där patienten måste bäras kan man snabbt och enkelt koppla bort larvfötterna med motor så har man en enklare och lättare bärstol på plats. Detta kan också vara en vinst vid in- och urlastning i fordon.


Art.Nr	F05630
Certifieringar	CE, EN1865
Vikt	25kg /11,2 kg
Höjd	100 cm (158cm)
Längd	65,5 cm
Bredd	51,6 cm
Lastkapacitet	227 kg
IP-klass	IP55



Väggfäste för FAST Chairs 10g

FAST Chair Väggfäste - designad för att säkert hålla fast FAST Chair i både statisk eller dynamisk applikation.

Enhandsfrigöring möjliggör snabb fastsättning eller lossning av stolen. Passar alla Ferno FAST-stolar. Krocktestad i 10G enligt EN 1789.

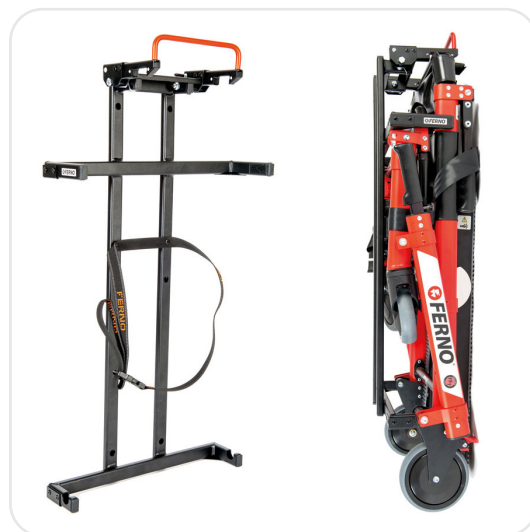

Art.Nr F05690

Bredd 468 mm

Vikt 2,4 kg

Höjd 877 mm

Längd 178,1 cm

Djup 182,5 mm

Ferno FAST Big Wheels

Introducerar Ferno Fast Big Wheels – den ultimata lösningen för enkel transport av patienter i alla miljöer. Konstruerade med precision och designade för hållbarhet är dessa stora hjul själva symbolen för tillförlitlighet och prestanda.

Utformade med material av hög kvalitet och banbrytande teknologi är Ferno Fast Big Wheels gjorda för att klara av de tuffaste terrängerna med lätthet. Oavsett om du navigerar i grov terräng, ojämna ytor eller trånga utrymmen, ger dessa hjul oöverträffad stabilitet och manövrerbarhet.

Med en strömlinjeformad design och robust konstruktion erbjuder Ferno Fast Big Wheels optimal viktfordelning, vilket minskar belastningen på användaren och säkerställer en jämn, kontrollerad rörelse. Den stora diametern av hjulen ökar hastigheten och effektiviteten, vilket gör att du kan transportera patienter snabbt och effektivt.



Art.Nr F05640

Lastkapacitet 250 kg

Vikt 8 kg

Höjd 530 mm (wheel)

Bredd 50 mm (wheel)



Bärstol Ferno S242 Orange

S242 är en mycket praktiskt, enkel och populär bärstol. Teleskopiska handtag vid fotändan och dubbla handtag på ryggen ger flera valmöjligheter vid krångliga lyft.

S242 har:

- Fyra hjul
- Frontmonterade svänghjul
- Tre patientbälten
- Vinylbelagda sits som är hygienisk och enkel att rengöra

Väggfäste för S242: S242-500.

Art.Nr	S242
Lastkapacitet	159 kg
Vikt	10 kg
Höjd	91,5 cm
Längd	121 cm
Bredd	52 cm
Hopfällbar höjd	91,5 cm
Hopfällbar längd	17 cm




Bärstol Ferno Compact 2

COMPACT 2 är en smidig och lätthanterad bärstol som tar liten plats. En klassisk favorit i svensk ambulanssjukvård.

- Prisvärd bärstol.
- Säker hantering av patienter
- Minskar belastningsskadorna
- Lätt att hantera
- Lätt att rengöra
- Låg vikt

Art.Nr	FGBAC3019
Lastkapacitet	200 kg
Vikt	9,4 kg
Höjd	93 cm
Längd	42 cm
Bredd	44,5 cm
Hopfällbar höjd	77,5 cm
IP-Hopfällbar längd	28,5 cm

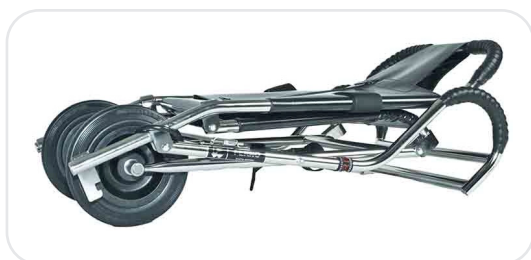

Pedi-Mate PLUS Pediatric Restraint System

PediMate®Plus är ett lätthanterat säkerhetsbälte för ambulanstransporter. PediMate®Plus ger en säker transport av de minsta barnen och är designat för pediatrika patienter från 4,5-45 kg.

Utrustningen rullas snabbt ut vid behov och fästs på ambulansbåren med tre remmar. Med ett justerbart fempunktsbälte anpassas utrustningen lätt efter barnets storlek. Passar alla Fernos ambulansbåsar samt Allfabåren.

- Säkrar pediatrika patienter i storlek från 4,5-45 kg
- Fullt justerbart fempunktsselesystem håller patienterna vid transport.
- Rullas ihop för enkel förvaring. Ihoprullad bredd 48 cm och 12 cm i diameter.
- Vinylkonstruktionen är giftfri och lätt att rengöra.
- Fästs med tre remmar på ambulansbåren.

Art.Nr 5003055

Lastkapacitet 4,5-45 kg

Vikt 1,59 kg

Längd 90 cm

Bredd 48 cm



Vårdbälte förflyttning, Ferno Walkbelt

Ferno Walk Belt är ett ergonomiskt vårdbälte som fästs på vårdtagaren och ger personalen möjlighet att ge ett stadigt stöd vid uppresning, gång eller överflyttning. Bälten ingår som kan sättas runt benen vilket gör att vårdbältet inte glider upp vid användning.

Fyra horisontella och fyra vertikala handtag ger flera möjligheter att få ett bra grepp och vårdbältet kan maskintvättas för bästa hygien.

- Vårdbälte som fästs på vårdtagaren och ger personalen stadiga handtag att hålla i.
- Vårdbältet ger möjlighet att ge ett stadigt stöd vid uppresning, gång eller överflyttning.
- Fyra horisontella och fyra vertikala handtag.
- Bälten ingår som kan sättas runt benen och gör att vårdbältet inte glider upp vid användning.
- Maskintvätt.

Art.Nr FWEWBLS

Certifieringar CE, MDR



Bärsele Easy Lift shoulder Svart

Easylift Shoulder är ett helt nyutvecklat hjälpmedel som avlastar händer och armar när man bär bår. Easylift är lätt att använda och har unika funktioner som gör detta till framtidens bärsele. Easylift har friktionslås som dels ger ett stadigt grepp och samtidigt gör att du blixtnabbt kan frikoppla dig om en oväntad situation uppstår.

- Lätt att använda, lätt att förstå
- Fördelar belastningen
- Omedelbar frikoppling vid oväntad händelse
- Lätt att rengöra
- Friktionslås som låser individuellt
- Kan bäras under jacka/väst, vilket gör den omedelbart tillgänglig
- Framtagen och utvecklad av ambulanspersonal med lång erfarenhet
- Easylift är tillverkad i förstärkt väv med plast/metal löpare och en friktionsyta i pvc
- Easylift ställs in individuellt
- Easylift är utvecklad och tillverkad i Sverige
- Rengörs enkelt med tvål/vatten, desinfektion och Virkon
- Kan tvättas i nätpåse i 60 grader



Art.Nr GE1500000016

Vikt 0,4 kg

Glidbräda 60 cm EasyGlide

EasyGlide är en smått genialisk liten uppfinning. Den hjälper till vid förflyttningar från rullstol till säng, toalett, bilsäte och många andra ställen där man kan vilja sätta sig en stund. Den är speciellt lämplig för att jämna ut höjdskillnader eller för att överbrygga kortare avstånd.

Glidbrädans kanter kan böjas och är därför smidig att placera framför rullstolens hjul som skydd mot smuts och annat. Den glatta ovansidan gör att det är lätt att förflytta sig medan antiglidtejp på undersidan gör att den inte halkar undan vid förflyttning. Den är lätt och praktisk att ta med sig och finns i olika storlekar.

- Glatt ovansida för komfortabel förflyttning.
- Långsidan på EasyGlide kan vikas upp som skydd mot rullstolshjulet.
- Antiglid på undersidan ger säkerhet och trygghet.
- Styv glidbräda i plast med vinklade sidor samt handtag i kortsidorna

Art.Nr SWR131641

Lastkapacitet 136 kg

Längd 60 cm

Bredd 33 cm



Evakueringsmadrass Germa Minitranz

MINITRANZ är ett utmärkt hjälpmedel för att förflytta patienter, framförallt i trånga utrymmen där det är svårt att komma åt. Den får plats under eller på akutmadrassen och är ett bra ergonomiskt hjälpmedel för att förbättra arbetsmomenten i olika situationer. Nu är undersidan förstärkt med "slideyta" likt akutmadrasserna!

- Klarar 250 kg belastning
- Svetsade sömmar, lätt att rengöra
- Får plats under/på akutmadrassen
- 10 st förstärkta handtag
- Med invikta handtag endast 46 cm bred
- 2 handtag i huvudändan gör att du enkelt kan dra patienten.
- Tillverkad i glatt PVC-väv
- Svensktillverkad av högsta kvalitet

Art.Nr	GE70050
Lastkapacitet	250 kg
Vikt	1,8 kg
Höjd	1,5 cm
Längd	136 cm
Bredd	76 cm
Hopfällbar bredd	46 cm
Certifieringar	MDR



Akutmadrass UNI Komfort

UNI Akutmadrass komfort för extra skum och komfort, och är en säker, hygienisk och ergonomisk universalmadrass som passar de flesta ambulansbåtar på marknaden.

UNI Akutmadrass är testad och utvecklad tillsammans med Nordisk ambulanspersonal med höga krav på hygien, säkerhet, ergonomi och komfort.

Akutmadrasser har högre krav på sig än en "vanlig" madrass avseende funktion och hygien.

Art.Nr	GE24271030003
Certifieringar	MDR 2017/745
Vikt	5,2 kg
Höjd	10 cm
Längd	185 cm
Bredd	50 cm




PACKADE SJUKVÅRDSVÄSKOR STOPPA BLÖDNINGEN

Sjukvårdsväska packad förstahjälpen M2 Grön

M2 är en väldigt populär packad väska med ett innehåll som är tänkt att hjälpa till att lösa både enkla och svåra akutsituationer. En praktisk metallfäste ingår för väggmontering.

Skenorna är försedda med ett snabbblås som enkelt kan öppnas för att ta med till den plats där första hjälpen behövs. Passar för offentliga miljöer, arbetsplatser och i fordon m.m. När du har öppnat väskan har du en bra översikt. Innehåller 17 olika produkter. Innehållsförteckning på hemsidan.

Överskådlig väska som fälls ut när man öppnar den.

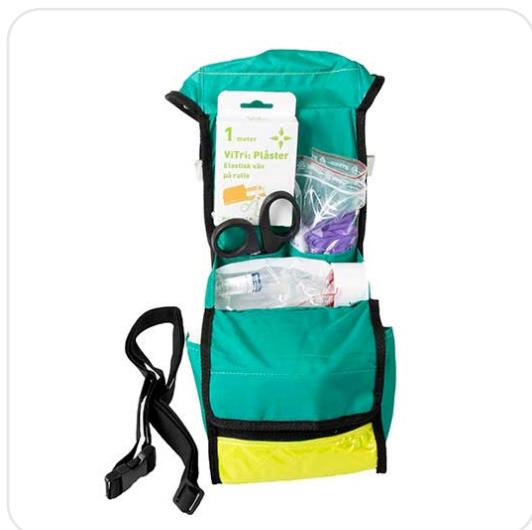

Art.Nr VT30611PA

Väska packad, stoppa allvarlig blödning

En mindre väska med färdigpackat stoppa blödning kit som tagits fram för offentliga miljöer och för att hänga framme vid farozoner för allvarlig blödning.

Att ha ett färdigt kit utrustat för detta är idag lika självklart som att ha en hjärtstartare i offentliga miljöer. Väskan är öppningsbar och god översyn över innehåll. Med utrustningen kommer du kunna stoppa en till två större blödningar. Innehållsförteckning på hemsidan.

“Stoppa Allvarlig Blödning” är tydligt tryckt på framsida av väskan för att dess innehåll inte ska missuppfattas.

Perfekt att ha tillgänglig där många människor rör sig eller i riskzoner. Den som står bredvid när något händer är den som kan göra skillnad och rädda liv när det kommer till en allvarlig livshotande blödning!



Art.Nr SWR480090PA

Vikt 600 g

Längd 28 cm

Bredd 8 cm

Höjd 20 cm

AED Mindray C1A Semi-Aut SWE/ENG Komplett Kit

AED Mindray C1 är en idealisk hjärtstartare för såväl erfarna som oerfarna livräddare i alla miljöer. ResQNavi guidar räddaren genom processen och ger mer detaljerade instruktioner vid behov. Dessutom är hjärtstartaren omedelbart redo att användas, tack vare de föranslutna elektroderna och den extra korta tiden från start till stöt.

Komplett Kit innehåller:

- AED Mindray C1 semiautomatisk inkl vuxen/barnläge
- Två språk, Lokalt + Engelska
- Elektroder & batteri med 4 års hållbarhet.
- 1st Readykit, väska m rakhyvel, handskar, pocketmask, sax, våtservetter, tork.
- Väggskylt AED
- Väggfäste

Art.Nr	VT9102
Färg	Gul/orange
Vikt	2kg
Höjd	7,8 cm
Längd	28,6 cm
Bredd	21 cm



AED Powerheart G5 SWE AED+väska+kit komplett set

Hjärtstartare med enkel, intuitiv funktion med tydlig röstguidning gör att även förstagångsräddare agerar snabbt och säkert vid ett plötsligt hjärtstopp. Oerfarna användare kan genomföra alla kritiska steg i en räddningsinsats med Powerheart G5:s HLR-feedback i realtid, instruktioner i användarens takt, intuitiv utformning av elektroderna samt automatisk defibrillering.

Med över 40 patent i USA är Powerheart® G5 hjärtstartare den första AED-enheten som kombinerar variabel eskalerande energi med snabba defibrilleringstider och HLR-feedback i realtid.

Komplett kit innehåller:

- AED
- Väska
- Beredskapskit med: handskar, rakhyvel, sax, andningsmask

Art.Nr	VT9002
Vikt	2,5 kg
Höjd	9 cm
Längd	30 cm
Bredd	23 cm





Whelen Perimeter LED Arbetsljus, 12-24V, Svart Ram

Whelen Perimeter levererar nedåt projicerad, högintensiv markbelysning till belysa arbetsområdet runt utrycknings- och nyttfordon.

- Ljus projiceras nedåt i 40° vinkel för att belysa ett stort område
- Hårdbelagda linser
- Helt inkapslad för fukt-, vibrations- och korrosionsbeständighet
- Krom, svart, gul, röd eller vit polykarbonathölje
- Monteras på vertikala ytor och kan monteras omvänt
- Gjuten gummipackning skyddar kroppspaneler

Art.Nr LS1050-05

Spänning 12-24V



Interiörljus, Whelen 6", Röd/Vit, 12V

Whelen's interiörbelysning «6 tum» med en diameter på 152,4 mm och ett djup på endast 16 mm är perfekta för en smidig och diskret montering.

Dessa modeller är mycket populära för antingen förstärkt vit ljus eller taktiskt rött ljus på insidan i utryckningsfordon.

Art.Nr LS1039-62

Diameter 152,4 mm

Djup 16 mm

Spänning 0.7A

Ficklampa INOVA® T4R® PowerSwitch™ Rechargeable Tactical Flashlight

Laddningsbar ficklampa på 1300 lumen med separat laddningsstation som går att koppla via USB och 220V. Framtagen för polis och militär med mycket höga krav på funktion och kvalitet. Mineralglas som skydd för LED samt tålig eloxering med militärstandard. Digitalt reglerat ljus med en optimerad ljusbild både för när- och fjärrljus. Inova T4R sitter monterad i alla Svenska polisbilar idag.

Ljusfunktioner: Max- och min läge, variabelt läge, stroboskop och tillfälligt av/på. Laddningsindikator på lampan. Laddare för 220V och 12V ingår.

Mått: 35mm x 190mm x 35mm

Art.Nr	5080006
Storlek	35mm x 190mm x 35mm
Vikt	263 g
Drifttid	2h max / 138h min
Lumen	Max 1300 Lumen
Batterier	1 rechargeable lithium-ion 2600mA



Pannlampa ZOOM 580 (700lm) 3xAAA

Zoom 580 är den enda pannlampa du någonsin behöver. 700 lumen ljusutgång / 200 meter ljuskägla. Drifttid på upp till 18 timmar. Roterat handtag för spot-till-flod-ljuskägla. 90° strålvinkeljustering.

Två separata LED-lampor: svalt vitt (tre ljuslägen, alla zoombara) / varmvitt (diffus stråle för nära synlighet, blinkande läge för nödanvändning).

Art.Nr	NSHTZOOM580
Vikt	95 g
Höjd	45 mm
Längd	65 mm
Bredd	45 mm
Diameter	41 mm
IP-klass	IP64





Vi på Ferno Norden har sedan 1982 arbetat i nära utvecklande samarbete med våra kunder. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav på säkerhet, kvalitet och funktion.



Våra primära kunder är ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen, civilförsvaret och försvarsmakten. Vi växer även inom industrin, offentliga miljöer, vårdinrättningar och den privata marknaden.



Vårt kvalitets- och miljösystem uppfyller kraven enligt ISO9001 och ISO14001.

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete följer och bygger på FN:s Agenda 2030, som består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.



GLOBALA MÅLEN
för hållbar utveckling

Tillsammans gör vi skillnad!

Ferno Norden Sverige AB ingår i en nordisk koncern med huvudkontor i Norge. I koncernen finns dotterbolag i alla nordiska länder under koncernnamnet Ferno Norden. Globalt finns Ferno international representerat i de flesta av världens länder. Det nordiska och internationella nätverket ger oss en bred kunskap och kompetens.

Allfa och Force är egna varumärken som utvecklats och produceras i Sverige. Utöver våra egna produkter har vi ett noggrant urval av produkter som skapar en genomtänkt och fungerande produktportfölj inom hela vårt breda marknadssegment. Vår personal är noga utvald för att kunna möta våra kunders krav, ofta med bakgrund och erfarenhet av akutsjukvård. Vi är ett personalpolitiskt sunt företag och all personal anställd i Sverige omfattas av kollektivavtal.

