



# Rörelsebegränsning



**Rörelsebegränsning är Ferno Nordens kärnverksamhet.  
Vi har i över 60 år globalt utvecklat och producerat utrustning för  
rörelsebegränsning i nära samarbete med våra användare.**

**Produkter:**

Ferno Norden har ett heltäckande produktprogram inom området rörelsebegränsning. Vi har många års erfarenhet av att utveckla produkter i nära samarbete med användarna. Flera av våra produkter i den här katalogen är framtagna efter direkt samarbete med personal verkssamma inom både ambulansen och räddningstjänsten i de nordiska länderna.

**Nationella Riktlinjer:**

Ganska nyligen reviderades riktlinjerna i de flesta nordiska länderna inom rörelsebegränsning och därmed kan rekommendationer och riktlinjer variera både regionalt och nationellt. En del i detta är att man bland annat i Sverige frångår begreppet immobilisering till det nya begreppet Spinal Rörelsebegränsning (SRB).

**EN-1789:**

EN-1789 Sjukvårdsfordon och utrustning – Vägambulanser: är en europeisk standard som anger minsta kraven för en ambulans som ska operera i Europa. I standarden ingår även en utrustningslista som anger minsta nivå av utrustning. I en akutambulans och IVA-ambulans (Typ B och C) skall det minst finnas: pick-up stretcher, vakuummadrass, splintset, nackkragar, urtagningsprodukt (kort produkt för urtagning ur fordon) inom området för rörelsebegränsning. Det kan göras nationella avsteg från listan om de nationella riktlinjerna ändras, men listan syftar till att hålla en gemensam lägsta nivå i Europa.

**EN-1865:**

EN-1865 Specifikation för bårar och annan förflyttningsutrustning: är en europeisk standard som anger minsta kraven för utrustning som: pick-up stretcher (Scoop bår i Fernos sortiment), vakuummadrasser och Spineboards inom området rörelsebegränsning. Produkter inom det här området måste uppfylla kraven i EN-1865.

**Internationella Riktlinjer:**

I de nordiska länderna har majoriteten av utövarna harmoniserat sina utbildningar efter konceptutbildningar som ATLS<sup>®</sup>, TNCC<sup>®</sup>, PHTLS<sup>®</sup> och TCCC<sup>®</sup>. Dessa utbildningar syftar till ett standardiserat omhändertagande av traumapatienter. En del i detta koncept är omhändertagandet av frakturer och misstänkta spinalskador och rörelsebegränsning.

**Att tänka på:**

*Vissa av produkterna inom rörelsebegränsning kan upplevas som enkla och andra lite mer komplicerade. Öva mycket och ofta, lär dig produktens begränsningar och risker. Gå utbildningar och håll dig uppdaterad på de senaste riktlinjerna och rekommendationerna!*

*Tveka inte att höra av dig om du har frågor!*

*/ Teamet på Ferno Norden*

## Ferno Scoop® EXL gul 227 kg

SCOOP® EXL är utan tvekan vår mest populära produkt för rörelse-begränsning men även för situationer där man behöver "skopa" upp patienter vid förflyttning. Ännu viktigare idag när patienten behöver flyttas upp på bår. Det unika TSL låset, den mjuka skålningen och dess ergonomiska handtag gör Scoop® EXL överlägsen. Scoop® EXL kan användas i röntgen, CT samt inne i MRI undersökningsrum. Scoopbåren kompletteras med tillbehör som X-spindel samt huvudstöd.

<b>Art.Nr</b>	F065EXL
<b>Höjd</b>	8 cm
<b>Bredd</b>	43 cm
<b>Längd</b>	165-201 cm
<b>Vikt</b>	8 kg
<b>Max kapacitet</b>	227 kg
<b>Certifiering</b>	CE, EN1865



## Extender kit TSL till Ferno Scoop EXL


Ferno® Scoop® extender kit TSL är ett relativt nytt tillbehör för att bredda patientytan på en Scoop® EXL. Möjligheten att utöka bredden på Scoop® EXL gör nu att man kan anpassa storleken utifrån den fysiska storleken på patienten.

Med en säker lastkapacitet på 227 kg och justerbar längd och bredd är Fernos Scoop® EXL nu kapabelt att användas på alla patienter, gammal som ung och liten som stor. Kan användas i ena eller båda läsen, allt beroende på situation och patientstorlek!

Används ofta vid hjärtstopp för snabb patienthantering och i kombination med hjärtkompressionsmaskiner.

Ett set innehåller 2 st. TSL.

<b>Art.Nr</b>	F0832274
<b>Höjd</b>	35 mm
<b>Bredd</b>	35 mm
<b>Längd</b>	13 cm
<b>Vikt</b>	490 g
<b>Max kapacitet</b>	227 kg
<b>Certifiering</b>	CE

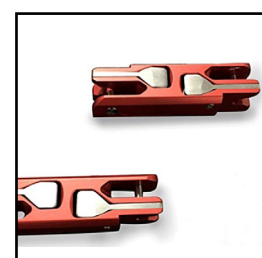



## Evakueringsbår Ferno XT

FERNO® XT fast extrication är en nyare produkt utvecklad för att snabbt och säkert kunna ta ur patienter i trånga utrymmen och samtidigt erbjuda rörelsebegränsning för nacke och rygg. Dess design och enkelhet möjliggör urtag på två sätt, snabbt urtag på ca. 30 sekunder för den övade personalen. Ett mer kontrollerat urtag med full fixering när situationen tillåter det och som kan göras på ca. 2 min.

- Låg vikt
- Effektiv huvudfixation
- Hygienisk, lätt att rengöra
- Tillverkad av starkt kompositmaterial
- Idealisk i trånga utrymmen
- Pedagogisk och användarvänlig
- Färgkodade remmar
- Praktisk förvaringsväska medföljer

<b>Art.Nr</b>	F126
<b>Höjd</b>	6 mm
<b>Bredd</b>	30 cm
<b>Längd</b>	83 cm
<b>Vikt</b>	2 kg
<b>Max kapacitet</b>	160 kg
<b>Certifiering</b>	CE

## Evakueringsbår Ferno KED

Originalt Ferno® KED® är ett mycket bra alternativ när det gäller rörelsebegränsning av patienter som skall tas ut ur trånga utrymmen. Stabiliteten ger stöd för nacke och rygg. KED® är även utmärkt att använda vid s.k. snabb urtagning vid livsfarligt läge. Handtag på ryggen och flera remmar ger flera val vid urtagning.

- Ferno® KED® är röntgengenomsläpplig.
- Påsydda bälten med snäppspännen för snabb applicering
- Färgkodade bälten
- Kan användas av flera patientstorlekar, inklusive barn och gravida.
- Justerbara sidor ger åtkomst till patientens bröstorg
- Inbyggda handtag ger ett bra grepp om patienten vid förflyttning.
- Komplet set består av KED® väst, väska, nackkudde samt pann- och hakband.

<b>Art.Nr</b>	F125
<b>Höjd</b>	3-14 cm
<b>Bredd</b>	27-80 cm
<b>Längd</b>	83 cm
<b>Vikt</b>	3 kg
<b>Max kapacitet</b>	227 kg
<b>Certifiering</b>	CE



## Vakuummadrass Easy Fix II Plus

EasyFix PLUS II har en unik design som ger ökat stöd för huvud, nacke och rygg med eller utan användning av nackkrage på patienten. Den unika designen underlättar även hanteringen av luftvägarna på en rörelsebegränsad patient. Övre delen av EasyFix PLUS har en förstärkt bottenplatta som täcker halskotpelaren. En unik omslagsfunktion tillsammans med fästremmar ger bättre stöd än traditionella system. Vakuummadrassen är idag även ett självklart ergonomiskt hjälpmedel för förflyttning av patienter. Tillsammans med Step by Step kan man förflytta patienter på upp till 250 kg på ett komfortabelt sätt i trappor och på plan mark till ambulansen. Vakuummadrassen kombineras med fördel med förflyttningsslakan Flexislide för ännu bättre patienthantering. Levereras komplett med väska, pump och lagningskit.

**Art.Nr** GE23271511001

**Höjd** 4,5 cm

**Bredd** 130/72 cm

**Längd** 208 cm

**Vikt** 11,5 kg

**Max kapacitet** 250 kg

**Certifiering** CE, EN1789, EN1865



## Vakuumsplint Rescue Lite helkropp

NYHET!

Rescue Lite Full Body Splint är utvecklad tillsammans med personal inom fjällräddningen. Att kunna ta sig fram i svår terräng och kunna ge bästa vård på plats ställer höga krav på en produkt. Låg vikt, att kunna bäras smidigt, passa ihop med övrig räddningsutrustning, vara ergonomisk för användarna och säker för patienten!

Denna helkroppsplint är även uppskattad i ordinär verksamhet där man vill kunna rörelsebegränsa men har ont om plats för en standard vakuummadrass. Splinten är packad i en rygsäck som underlättar arbetet om den måste bäras med.

Rescue Lite är framtagen för att vara mycket lättanvänd i kombination med räddningsbårar.

**Art.Nr** GE23271513001

**Höjd** 4 cm

**Bredd** 131 cm

**Längd** 200 cm

**Vikt** 6 kg

**Lastkapacitet** 220 kg

**Certifiering** CE







## Vakuumsplintset Easy Fix Plus

EASYFIX Plus är våra senaste vakuumsplintar, svensktillverkade av högsta kvalitet! Splintarna är formsyddade för arm, underben och helben för god passform och snabb applikation. Vakuumsplintar är avsedda att stabilisera och fixera frakturer på patienter under transport.

Splintarna är konstruerade med innerpåsar med kanalsystem som håller polstringen på plats. Nu även förbättrad hygien med bland annat BioSafe remmar som är lättare att hålla rena.

Remmarnas position gör också att det går mycket snabbt och lätt att applicera dem på en patient.

Ett komplett splintset innehåller väska, tre storlekar på splintar (helben, underben och arm), pump och reparationskit.

Splintarna håller vakuum i minst 15 timmar och är röntgengenomsläppliga.

**Art.Nr** GE272115000

**Höjd** 37 cm (väska)

**Bredd** 18 cm (väska)

**Längd** 75cm (väska)

**Vikt** 4,6 kg

**Certifiering** CE

## Vakuumsplintset Ferno

Vakuumsplintar modell Ferno® är av hög kvalitet i enkel och lättförståelig design. Vakuumsplint Ferno® är en av världens mest sålda vakuumsplintar. Splintarna tillverkas i Sverige men den höga tillverkningsvolymen gör den här splinten mycket prisvärd. Ferno® vakuumsplintar är avsedda att stabilisera och fixera frakturer på patienter under transport.

Ett komplett splintset innehåller väska, tre storlekar på splintar (helben, underben och arm), pump och reparationskit.



**Art.Nr** GEAS190

**Bredd** 32 cm (väska)

**Längd** 82 cm (väska)

**Vikt** 4.3 kg

**Certifiering** CE

## Vakuumkudde MRP, Motion Restriction Pillow

MRP är utvecklad tillsammans med ambulanssjukvården för att skapa en bekväm, praktisk och hygienisk kudde som vid behov kan användas för rörelsebegränsning under transport på ambulansbår. Ökad stabilitet för huvud och nacke är önskvärt i många transportsituationer. Det kan handla om trauma, stroke, medvetandesänkning och intuberade patienter, med flera.

Forma kudden efter önskemål och evakuera enkelt luften i MRP med vår vakuumpump som köps separat (GEAS160) eller med en elektrisk sug.

- Hög komfort
- Enkel att använda
- Enkel att rengöra
- Individuell anpassning

**Art.Nr** GE1500000115



**Höjd** 8 cm

**Bredd** 34 cm

**Längd** 47 cm

**Vikt** 700 g

**Certifiering** CE

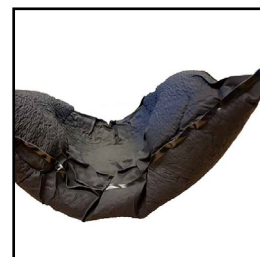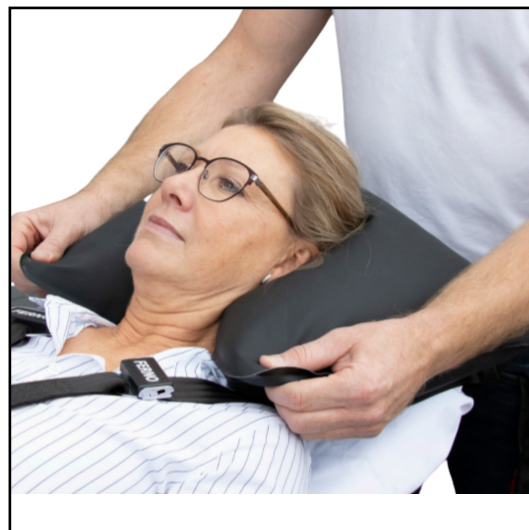

## Vakuumkudde vit och blå, olika storlekar

Våra vita vakuumkuddar används dagligen för stabilisering, stöd och fixering av patienter. Ett vanligt användningsområde är under operation, till exempel hand- eller ögonkirurgi för att säkerställa en fixerad patient, under behandling och/eller under undersökningar som röntgen, CT eller MR.

Ett annat vanligt användningsområde är stabilisering av barn och vuxna med olika typer av funktionshinder där man behöver stabilitet och stöd. Storlekarna varierar från 30x40cm till 80x200cm.

Våra blå vakuumkuddar fungerar precis som de vita men har ett lite kraftigare material. Därför används de oftare för stabilisering, stöd och fixering av patienter inom veterinärsjukvården.

Finns i olika storlekar, tveka inte att höra av dig med frågor!



## Sträcksplint ben, komplett CT-7



Efter många tester under hårda förhållanden runt om i världen av sjukvårdspersonal är vi övertygade om att den här sträcksplinten klarar jobbet! Lätt, liten och kompakt men har det som behövs!  
Mer kompakt och lättare än någon annan sträcksplint på marknaden.  
Kraftigare kolfiberrör gör den ännu mer hållbar.  
Kan appliceras på patienten på under 30 sek.  
Enklare att packa ner med ny taktisk förvaringsväska.  
Ny funktion där man skruvar upp draget ger ett starkt och precist drag.  
Kan fästas vid vaden men även under knät om situationen kräver det!

**Art.Nr** 5050013

**Höjd** 10 cm (väska)

**Bredd** 10 cm (väska)

**Längd** 30,5 cm (väska)

**Vikt** 450 g

**Certifiering** CE

## Ferno Flex Splint



Flex Splint är precis så flexibel som namnet antyder. Flex Splint är alltid klar att användas på frakturer på extremiteter som behöver rörelsebe- gränsas. Tar liten plats i akutväskan. Flex Splint är tillverkad i en mjuk och lätt formbar aluminium som polstrad på båda sidorna. Man kan även klippa i Flex Splint för att göra en mindre splint. Flex Splint kan rengöras med alla på marknaden förekommande desinfektionslösningar eller tvättas i mild tvållösning. Efter tvätt kan Flex Splint enkelt förvaras platt eller rullas ihop igen. Flex Splint är röntgengenomsläpplig.

**Art.Nr** 5003000

**Bredd** 11 cm

**Längd** 92 cm

**Vikt** 154 g

**Certifiering** CE



## Sträcksplint FernoTrac®

FernoTrac® sträcksplint är avsedd för prehospitalt bruk för användning på vuxna patienter med misstänkta frakturer i nedre extremiteterna. FernoTrac® sträcker benet genom mekanisk dragning för att lindra smärta och underlätta transport. Breda elastiska stödband behåller det skadade benet i position.

FernoTrac® är den mest komfortabla sträcksplint vi kan erbjuda och den används lika ofta inne på sjukhus som i ambulansverksamheten.

Barnmodellen (F443) används förutom vid sträckning prehospitalt även vid planerade transporter där benet ska hållas sträckt.



**Art.Nr** F444

**Höjd** 8 cm

**Bredd** 27 cm

**Längd** 90 cm

**Vikt** 3 kg

**Certifiering** CE

## Bäckenstabilisering Pelvic Sling

Pelvic sling med unikt pneumatiskt system och finns i tre storlekar. Den pneumatiska Pelvic Sling ger tidig stabilisering av bäckenfrakturer vid olycksplatsen för att möjliggöra patienttransporter och minska livshotande blödning. De uppblåsbara manschetterna utövar ett sidtryck på bäckenet för yttre stabilisering med syfte att återfå de anatomiska förhållandena.

- Minimerar manipulation av bäckenet.
- Krävs lite kraft för att applicera.
- Finns i tre storlekar. Art. nr. nedan är storlek M som passar ca. 90% av befolkningen och brukar räknas som standard.

**Art.Nr** 5001100

**Höjd** 90-110 cm

**Vikt** 535 g

**Certifiering** CE



## Evakueringsbår Ferno XT PRO



FFERNO® XT PRO fast extrication är en nyare produkt utvecklad för att snabbt och säkert kunna ta ur patienter i trånga utrymmen och samtidigt erbjuda rörelsebegränsning för nacke och rygg.

XT PRO bygger på samma koncept som Ferno XT. Skillnaden är att PRO är framtagen för både rörelsebegränsning av huvud/nacke/rygg med möjlighet till lyft. Testad enligt EN 1498.

Därför är det här den rätta produkten när man i trång miljö /confined space behöver lyfta någon vertikalt på ett säkert sätt. Då fästpunkten är rakt ovanför huvudet kan man enkelt lyfta och parera en person ur manhål och andra trånga utrymmen.

**Art.Nr** F126XTPRO

**Höjd** 6 cm

**Bredd** 30 cm

**Längd** 83 cm

**Vikt** 3,4 kg

**Max kapacitet** 160 kg

**Certifiering** CE, EN1498

## Evakueringsbår Ferno KED PRO



Ferno® KED® PRO är ett mycket bra alternativ när det gäller rörelsebegränsning av patienter som skall tas ut ur trånga utrymmen. Stabiliteten ger stöd för nacke och rygg. KED® PRO är även utmärkt att använda vid s.k. snabb urtagning vid livsfarligt läge. Handtag på ryggen och flera remmar ger flera val vid urtagning. Ferno's KED®Pro är en vidareutveckling av den traditionella KED®. Alla nya funktioner gör KED®PRO till ett bra val av utrustning för professionella urtagnings och räddningsaktioner. KED®PRO har tre huvudkuddar i mindre design för större flexibilitet och anpassning till patienten. Därför är det här den rätta produkten när man i trång miljö / confined space behöver lyfta någon på ett säkert sätt.

**Art.Nr** F125PRO

**Höjd** 3,5 cm

**Bredd** 82 cm

**Längd** 83 cm

**Vikt** 4,5 kg

**Max kapacitet** 250 kg

**Certifiering** CE





## Ferno XT Floating

Ferno XT Floating är en lätt och smidig räddningsutrustning för att evakuera och vid behov rörelsebegränsa en nödställd vid vattenlivräddning. Dess lätta konstruktion gör att man enkelt för in utrustningen under kroppen, fäster remmar och flythjälpmedel i några klick. Sedan kan man enkelt dra den nödställda i land med remmar/öglor på sidan. Utrustningen kan hängas synlig på väggen eller enkelt packas ned i medföljande väska.

- Låg vikt.
- Effektiv huvudfixation.
- Fytelemt för att hålla patientens huvud över vattenytan.
- Hygienisk, lätt att rengöra.
- Tillverkad av starkt kompositmaterial.
- Pedagogisk och användarvänlig.

<b>Art.Nr</b>	F126XTFLOATING
<b>Höjd</b>	11 cm
<b>Bredd</b>	35 cm
<b>Längd</b>	120 cm
<b>Vikt</b>	3,3 kg
<b>Max kapacitet</b>	160 kg
<b>Certifiering</b>	CE

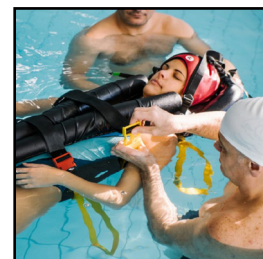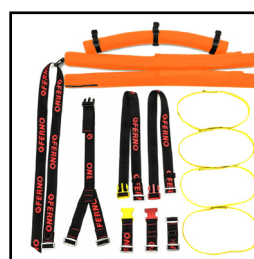



## PXB, Pool Extrication Board

Pool Extrication Board, PXB är framtagen specifikt för livräddare för att utföra snabb, effektiv och säker livräddning i vatten. Den är extra effektiv i pooler där en kant annars kan försvåra möjligheten att snabbt rädda en nödställd ur vattnet. Dess flytförmåga håller den nödställda flytande. Remmar och huvudblock gör att du enkelt vid behov även kan rörelsebegränsa personen.

Vid huvudänden finns en matta på baksidan som ger en bra stabilitet för räddningspersonal vid poolkanten och är samtidigt ett bra hjälpmedel för att enkelt och ergonomiskt snabbt få upp den nödställda ur vattnet.

Utvecklad av Ferno i samarbete med Royal Life Saving Society UK.

<b>Art.Nr</b>	FGB10776700
<b>Höjd</b>	4 cm
<b>Bredd</b>	40 cm
<b>Längd</b>	200 cm
<b>Vikt</b>	10 kg
<b>Max kapacitet</b>	182 kg
<b>Certifiering</b>	CE

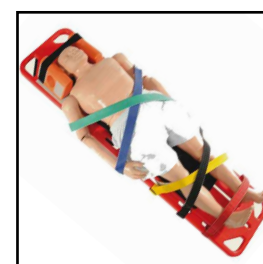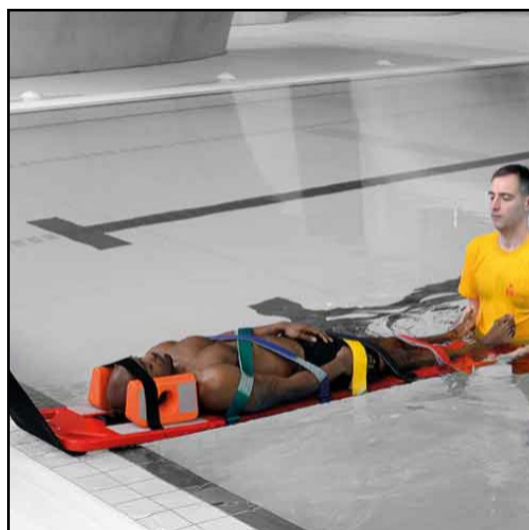


## Spineboard Najo redihold 41 cm

NAJO® Redihold® är den mest allsidiga spineboarden som är en enkel och användbar spineboard. De många handtagen runt ryggbrädan gör det enkelt att hitta ett grepp som passar. Bärigheten i konstruktionen gör att ryggbrädan flyter med upp till 62 kg vikt på och används därför ofta vid vattenlivräddning. Najo Redihold är röntgengenomsläpplig.

- Låg vikt.
- Flytförmåga.
- Lätt att rengöra.
- Hög belastningsförmåga.
- Ergonomiska handtag.
- Utan pins
- Går att få med pins. (Art. nr. FNAJO01205)

<b>Art.Nr</b>	FNAJO10105
<b>Höjd</b>	4,5 cm
<b>Bredd</b>	41 cm
<b>Längd</b>	183 cm
<b>Vikt</b>	7 kg
<b>Max kapacitet</b>	272 kg
<b>Certifiering</b>	CE

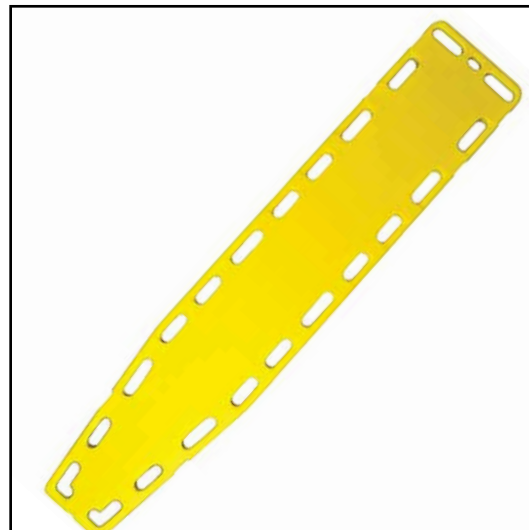

## Spineboard Millennia 41 cm, pins

Spineboard Millennia har en easyslideyta som ger en jämn och lätt patientförflyttning.

Skumfyllt material isolerar och ger en bättre flytförmåga.

Pins på sida ger ökade möjligheter för fixeringsremmar med karbiner.

Millennia är röntgengenomsläpplig, enkel att rengöra och lättarbetad.

Finns även med en bredd på 46 cm. (Art. nr F2001)

<b>Art.Nr</b>	F2010
<b>Höjd</b>	4,5 cm
<b>Bredd</b>	41 cm
<b>Längd</b>	183 cm
<b>Vikt</b>	6 kg
<b>Max kapacitet</b>	159 kg
<b>Certifiering</b>	CE





## Bälte Spineboard/Scoopbår, färgkodade, 5st

Fem remmar med plastlås samt ögla i olika färger för rörelsebegränsning på Scoopbår eller Spineboard. Set om fem olivfärgade remmar levereras i en smidig förvaringspåse.

Remmarna finns även med plastlås samt karbinhake. Mycket populärt alternativ för scoopbår eller spineboard med "pins" för att snabbt kunna klicka fast remmarna med karbinhaken.



**Art.Nr** GEAS420/GEAS430

**Bredd** 5 cm


**Vikt** 0,9 kg/1,35 kg

**Certifiering** CE

## Bälte X-Spindel för Scoop och Spineboard

X-Spindel är vår mest sålda produkt inom fixering är utvecklad i samarbete med svensk ambulanspersonal. X-spindel fixerar thorax och bäcken bättre med X-konstruktionen och centerremmen behövs inte hållas spänd för full fixering vilket underlättar när du har patienter som är korta. X-spindelns låser med kardborre och levereras i en smidig förvaringspåse.

NYHET! Den senaste versionen har nu olivfärgade remmar som underlättar fixeringen och kommunikationen mellan personalen i en akut situation!

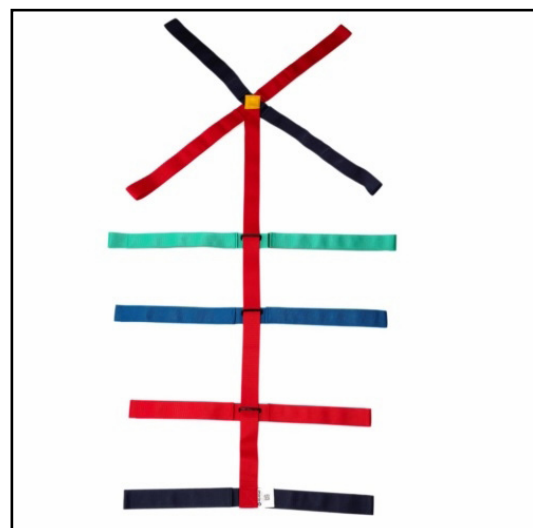

**Art.Nr** GEAS405

**Vikt** 1,1 kg

**Certifiering** CE

## Huvudstöd Ferno B-Lock

Ferno B-Lock är ett kombinationshuvudstöd som passar både på Scoopbårar och på Spineboards. Ferno B-Lock är kompakt, har låg vikt och är tillverkat i ett mjukt och komfortabelt material med en antibakteriell ytbehandling. Sidostöden har stora och mjuka öppningar för öronen vilket ger en hög komfort samtidigt som kommunikationen med patienten inte påverkas av att man blockerar öronen. Pann- och hakremmen är tillverkade i mjukt neopren material och är mycket följsamt och komfortabelt.

Ferno B-Lock är det mest komfortabla, flexibla och hygieniska huvudstöd marknaden kan erbjuda.

**Art.Nr** F00022

**Höjd** 14 cm

**Djup** 24 cm

**Längd** 30 cm

**Vikt** 970 g

**Certifiering** CE



## Huvudstöd Ferno CHI

Huvudstöd CHI har en unik design på huvudstödet som gör att den passar på alla Fernos Scoopbårar och spineboards. CHI är tillverkat i kompakt latexfri polyuretan med antibakteriell yta. Detta gör huvudstödet väldigt stabilt, mindre känsligt för yttre skador vilket en längre livstid på produkten. Designen är användarvänlig och en enkel genomgång räcker oftast som utbildningsinsats. Röntgen och MR kompatibel.

**Art.Nr** FGB031271300

**Höjd** 17 cm

**Djup** 25 cm

**Längd** 32 cm

**Vikt** 2,5 kg

**Certifiering** CE





## Huvudstöd Ferno Universal

F445 Huvudstöd Universal är kanske världens mest sålda huvudstöd. Enkelt att använda, lätt att rengöra. Huvudstödet är uppbyggt på en platta som fixeras på backboarden, passar majoriteten av alla backboards på marknaden. Två huvudkuddar med hål vid öronen. Två rejäla pann/hakremmar. F445 har minimal interferens med röntgen, MR eller CT. Huvudstödet är tillverkat i ett slutet skummaterial, det är vattentätt och kan enkelt rengöras.



**Art.Nr** F445

**Höjd** 18 cm

**Djup** 26 cm

**Längd** 39 cm

**Vikt** 900 g

**Certifiering** CE

## Nackkrage, WIZlock 3-pack

Justerbar nackkrage som är enkel att använda. Det som är unikt med Wizloc® är att man applicerar kragen först, sedan gör man tillpassningen. Säljs i 3-pack.



**Art.Nr** 5004600

**Vikt** 140 g

**Färg** Rosa

**Certifiering** CE



Vi på Ferno Norden har sedan 1983 arbetat i nära och utvecklande samarbete med våra kunder. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav på säkerhet, kvalitet och funktion. Våra primära kunder är ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen, civilförsvaret och försvarsmakten. Idag växer vi även inom industrin, offentliga miljöer, vårdinrättningar och den privata marknaden. Företaget är ISO-certifierat inom miljö 14001:2015 och inom kvalitet 9001:2015.

<b>LAND</b>	<b>TELEFON</b>	<b>E-POST</b>	<b>WEB</b>
<b>SWEDEN</b>	<b>+46 520 420 200</b>	<b>fab@fernonorden.com</b>	<b>www.fernonorden.se</b>
NORWAY	+47 33 03 45 00	fno@fernonorden.com	www.fernonorden.no
DENMARK	+45 43 62 43 16	fas@fernonorden.com	www.fernonorden.dk
FINLAND	+358 (0)29 1700 454	foy@fernonorden.com	www.fernonorden.fi