



BÄRSTOL/TRAPPSTOL

FAST CHAIR MED AVTAGBAR POWER

FAST är den mest flexibla serien av trappstolar för en enkel och ergonomisk patienthantering. FAST systemet är en ny och flexibel stolslösning, bärstol och powerstol med motor i ett.

Med motoriserade larvfötter (PowerTraxx), kan man enkelt transportera patienter upp och ner i trappor. Om man hamnar i situationer där patienten måste bäras kan man snabbt och enkelt koppla bort larvfötterna för att lättare och enklare hantera stolen. Detta kan också vara en vinst vid i- och urlastning i fordon.

FAST-stolen har en stark konstruktion och kan belastas med upp till 250 kg. Stolen är utrustad med stora svänghjul fram och fasta bakre hjul vilket gör den lättmanövrerad i alla miljöer.

Den hygieniska sitsen i vinyl eller hårdplast är förhöjd bakom ryggen vilket gör den komfortabel att sitta på.

Art nr: F05630

Kapacitet: 250 kg

Vikt: 11,2 / 25 kg

Bredd: 51,6 cm

Höjd: 100/158 cm

Längd: 65,5 cm

IP-klass: IP55

Certifieringar: EN1865







Stolen finns i tre olika utföranden. Förutom den här med avtagbara motoriserade larvfötter (PowerTraxx) finns den även som manuell stol där man väljer mellan fasta och avtagbara larvfötter.

Finns även i versioner med rygg -och sittdel i hårdplast (F05630A).

KOMPLETT FAST-STOL MED POWERTRAXX LEVERERAS MED:

- Mjukt huvudstöd för ökad komfort.
- Hygienisk sits i vinyl eller hårdplast (ABS), båda är lätta att göra rent och kan vid behov bytas ut.
- Två patientbälten.
- Ett bälte för fötterna.
- Armstöd för ökad trygghet för patienten.
- Ergonomiskt fotstöd.
- Handtag på baksidan.
- Det övre handtaget kan justeras i fyra steg.
- Teleskophandtagen på framsidan kan justeras i fem steg.
- avtagbara motoriserade larvfötter (PowerTraxx)
- Milwaukee batteri med tillhörande laddare.
- Material: Aluminium/ vinyl/ plast
- Mått ihopfälld: 100cm x 51,6cm x 23cm
- Hjul: 12,5cm/15cm

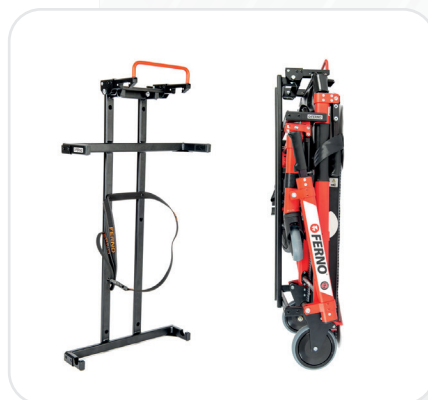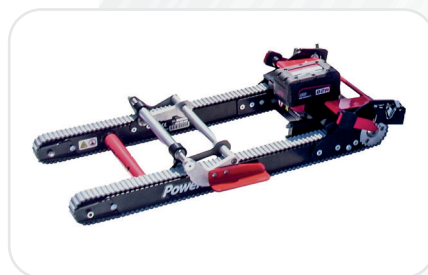

FAST-stolen kan även levereras med krocktestat väggfäste som tillbehör.

