



FERNO®

VIPER2

STRETCHER & LOADING SYSTEM

VIPER2-båren kombinerar kraft, säkerhet och enkel hantering i ett lätt och driftsäkert bår- och lastsystem. Det sparar tid när varje sekund räknas, minskar kostnaderna och ger maximal trygghet för både patient och personal.

Den kombinerar hög kapacitet, smarta funktioner och enkel hantering. Med 320 kg lyftkapacitet, kraftfullt litiumbatteri och manuell nödmanövrering är den alltid redo – även vid krävande transporter. Flexibla inställningar, robusta hjul och SX-armstöd gör den säker, bekväm och anpassningsbar för alla patienttyper, inklusive bariatrisk vård.



VIPER2 BASIC

I Basic (F1001-B) ingår;

- Bälten
- 4 hjullås
- SX-sidoarmstöd

VIPER2 PREMIUM

I Premium (F1001-P) ingår;

- Bälten
- 4 hjullås
- Extended headrest
- Belysning
- Lastnät
- Black push bar
- Pac Rac mounts
- IV Pole
- SX-sidoarmstöd

NYHETER

- Ny elektronisk box
- Löstagbart batteri
- Starkare och snabbare hydraulikpaket
- Nytt låssystem
- Lås på alla hjul
- Nya tillval så som; 200mm hjul, belysning mm



Art. nr	F1001-B / F1001-P
Length	2000 mm / 1600 mm
Width	600 mm
Height	380 mm / 1330 mm
Weight	75 kg *
Lift Capacity (unassisted)	320 kg

För komplett system lägg till Viper Loading System och välj mellan akutmadrass UNI standard/ komplett (6cm/ 10 cm tjocklek).

* Vikten inkluderar batteri men inte madrass och bälten eller andra tillval.

FERNO® **VIPER2** STRETCHER & LOADING SYSTEM

VIPER Loading System (VLS) gör lastning och lossning snabb, säker och enkel – även på lutningar och ojämna underlag. Det mekaniska systemet kräver ingen ström, minimerar manuella lyftmoment och guidar automatiskt baren i rätt position. Med en knapptryckning är baren låst, benen infällda och redo att föras in i fordonet – allt på under 20 sekunder.

- Mekaniskt last- och fästsystem – ingen ström, ingen elektronik att serva
- Elektroniskt interlock-system förhindrar upplåsning om benen inte är i markläge
- Lastning och lossning på under 20 sekunder
- Minimal manuell ansträngning – lastarmen guidar baren automatiskt i rätt position
- Fungerar även på lutningar, vinklar och ojämna underlag
- Kompakt design, endast 2000 mm – passar även i kortare fordon




Certifieringar: VIPER-båre och lastsystem är 10G dynamiskt krocktestat och certifierat enligt EN 1789:2020, CEN-kompatibelt, uppfyller EN 1865:2024 och Medical Device Regulation (EU) MDR 17/745, samt IP66-klassad – lastsystemet kan högttryckstvättas.

Art. nr	F1002
Length	2000 mm
Width	570 mm
Height	260 mm
Weight	68,8 kg
Load Capacity	400 kg

TILLVAL


VIPER²

STRETCHER & LOADING SYSTEM

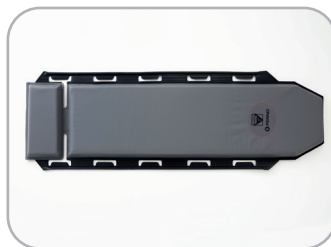

**Akutmadrass
UNI Standard/Komfort**

GE24271030000/3

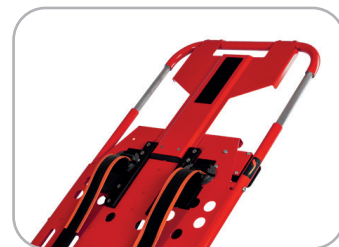

**VIPER Head End Backrest
Extension**

F1005



**VIPER Split Scoop Surface
Extender Kit**

4000107 (V-SX-EXL)



**VIPER Three-Stage
IV Pole**

F1007



**VIPER Equipment Pole
System**

F1012



**PacRac+[®]
Equipment Table**

F8034



**VIPER Black
Push-Bar**

F1013



**VIPER Document holder
netting**

5009360



**VIPER Defib
Hook**

3000292 / 3000285



**VIPER Mounting Hardware
Kit for fixation of PacRac+[®]**

F1009



**VIPER
Push Poles**

F1003



**VIPER O₂
Cylinder Holder**

3000284



**VIPER Lateral
Medical Rails**

F1008-L/ R



**VIPER Lighting
Option**

HOVERBOARD



Hoverboard ViviBase Viper Air Suspension

- Lateral är ergonomi och komfort för både patienten och vårdpersonalen. Vivibase kan absorbera upp till 80% och aldrig mindre än 50% av ojämnheter i vägbanan. Den automatiska luftfjädringen skyddar patienten utan att orsaka åksjuka genom att gunga.

- Luftfjädring kombinerat med hydrauliska stötdämpare, fjädringsslag 170 mm
- Automatisk viktjustering och optimal svävning från patientens vikt 0 – 320 kg
- Automatisk sänkning vid i och urlastning av bårn.
- Solit rostfritt stål med reptålig yta.
- Kompressor 12 Volt DC, 16 Ampere i en hermetisk extern låda
- Helt underhållsfritt, lätt att rengöra och desinficera.
- Det krävs ingen årlig kontroll, därför inga uppföljningskostnader på lång sikt
- Integrerad laddning för Ferno VLS/VIPER

Art. nr.: F1020



Hoverboard Xbase Viper Pneumatic - Lateral

Genom ett enkelt knapptryck frikopplas XBASE så länge du håller inne knappen. Du kan nu sidoförskjuta XBASE i 13 olika positioner (41 cm). När du släpper knappen låser sig XBASE automatisk i nästa position. Då funktionen är pneumatisk behövs ingen kraft för detta moment.

- Pneumatisk = flytande sidoförflyttning.
- 13 x 31,5 mm steg = 410mm totalt
- Solit rostfritt stål med reptålig yta.
- Helt underhållsfritt, lätt att rengöra och desinficera.
- Det krävs ingen årlig kontroll, därför inga uppföljningskostnader på lång sikt
- Integrerad laddning för Ferno VLS/VIPER

Art. nr.: F1022