



**BeneHeart D1**  
Defibrillator



Svensk återförsäljare:  
ViTri Medical AB  
Tel: 08-7477660  
info@vitri.se  
www.vitri.se

[www.mindray.com](http://www.mindray.com)

P/N:ENG-BeneHeart D1(Pro)-210285x12P-20180919  
©2017 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd. All rights reserved.

## BeneHeart D1

Defibrillator



## Kraftfullt stöd för kvalificerad räddning

BeneHeart D1 är en kraftfull rådgivande extern defibrillator (AED). BeneHeart D1 som är lätt, kompakt, tålig och lättanvänd innehåller ändå alla de funktioner man kan förvänta sig av en modern AED. Den ger dig bästa stöd under hela räddningsprocessen.

Baserad på bifasisk teknologi, kan energinivån eskaleras till 300 J och 360J. Beneheart D1 ger dig möjlighet att öka andelen lyckade defibrilleringar genom att öka energin i efterföljande chocker.


Med hänsyn tagen till den stressiga och tidskritiska arbetsmiljön har D1's professionella konfiguration utformats specifikt för akutvårdens olika specialister så att dessa kan behandla hjärtstoppsspatienter med samtidig kontinuerlig EKG-övervakning. De intelligenta funktionerna och det intuitiva handhavandet gör D1 till en effektiv och flexibel livräddande enhet till stöd för professionell räddningspersonal.






## Effektiv: Möjliggör snabbare respons

- **Stro 7-tums TFT display** ger tydliga och lättfattliga instruktioner i färg.
- **Förinstallerade elektroder** sparar tid.
- **Enkel omkoppling mellan barn och vuxna** patienter via endast ett knapptryck..
- **Auto-identifiering av patienttyp** via elektrodinkoppling gör att lägre energiinnehåll levereras till pediatrika patienter.
- **Auto-justering av ljudvolym och ljusstyrka** gör att du komfortabelt kan använda D1 i de mest varierande miljöer.

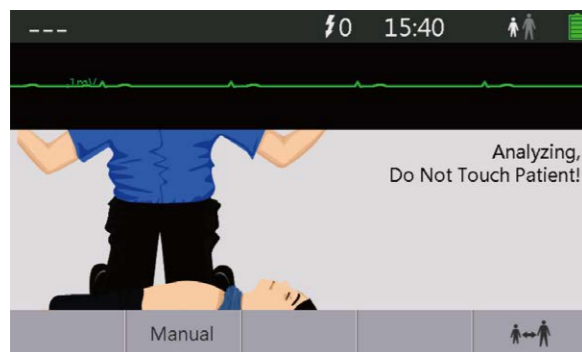

## Flexibel: Hjälper räddningspersonalen att genomföra mer professionella behandlingar

- **Riktig manuell inställning med valbara energinivåer** möjliggör komplett 1-2-3 stegsprocess för att behandla patienten med högkvalitativa chocker.
- **Oberoende 3-avlednings ECG övervakning** via en separat inkoppling tillåter dig att övervaka fler EKG-avledningar eller arytmier samtidigt som defibrillatorelektroden används.
- **Synkroniserad defibrillering** är också möjlig trots att D1 är en liten och kompakt enhet..

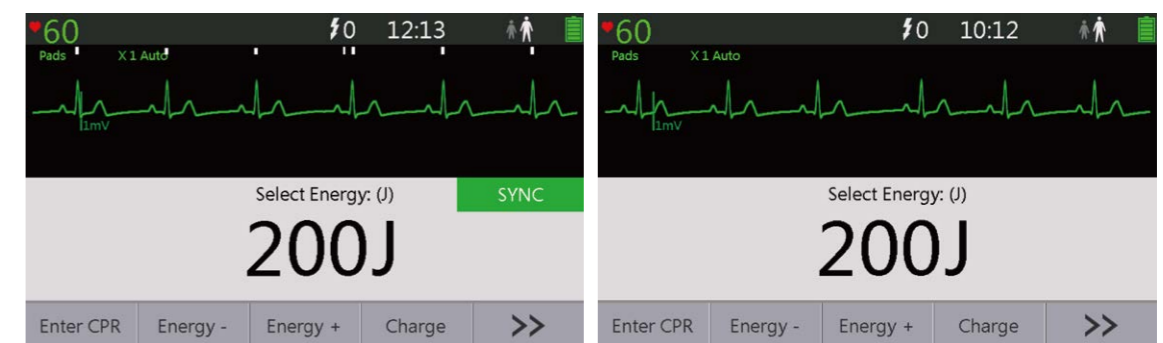

# BeneHeart D1

Defibrillator



*Beneheart D1 har en hög klassning mot damm och vattenintrång (IP55).*

## Batteri och extern laddare



Beneheart D1 med ett Li-ion batteri har kapacitet för både mer än 300 chocker om 200J eller 200 chocker om 360J samt 12 timmar övervakning. Den externa laddaren har plats för ett extra batteri som är uppladdat och klart för användning

\*Li-ion batteriet är kompatibelt med Beneheart D3.

## LED indikator



Automatiska självtester genomförs periodiskt och resultaten visas via audiovisuella meddelanden. Det finns även en synlig indikator som med grönt bekräftar att D1 är klar för användning.

## Bärväska



Bärväskan erbjuder plats för D1 samt extra batteri, ekg-kabel, elektroder och readykit inkl andningsmask, sax och rakhyvel.

## USB Port



Export av data från D1 görs enkelt via ett USB-minne för vidare analys i en PC med Mindrays programvara installerad.